




Linha Digital



**Inovação
para uma
vida plena**

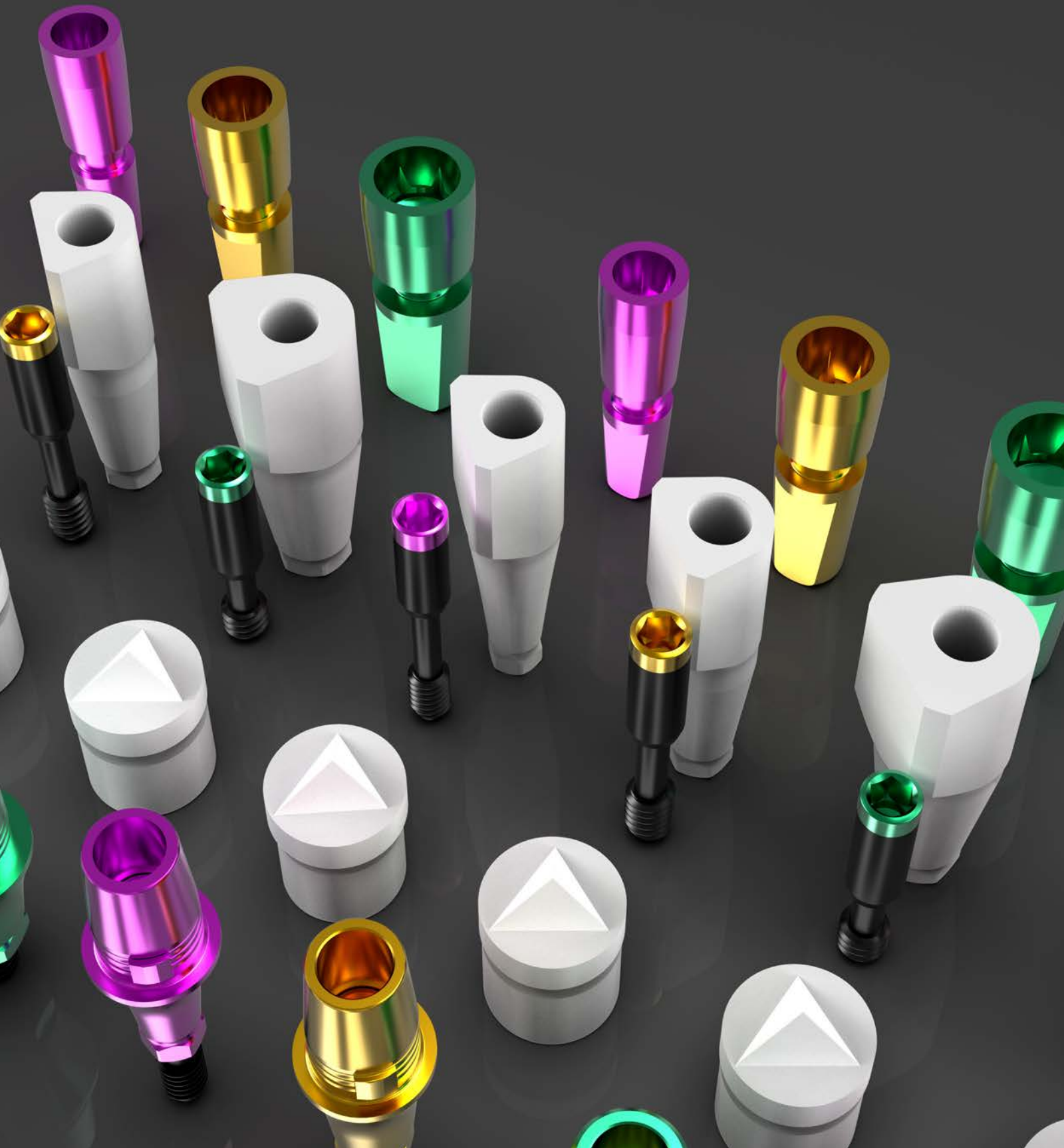



CONECTAR DOIS MUNDOS APARENTEMENTE DISTANTES E PERMITIR QUE A TECNOLOGIA DEVOLVA A ESPONTANEIDADE DA VIDA.

Com esse propósito, nasceu a Plenum®. E com ela, a implantodontia ganha uma nova dimensão. Por trás de cada inovação, profissionais com uma absoluta paixão pelo conhecimento e um profundo encantamento pelo potencial humano. Uma mistura motivadora de gente que está revolucionando processos, produtos e serviços por meio da cocriação.

Inovando em implantes e biomateriais, a Plenum® busca a expressão do corpo em sua totalidade, da regeneração física ao bem-estar mental e social. Ao trazer soluções de excelência e torná-las acessíveis e sustentáveis, a Plenum® revoluciona o mercado e constrói vínculos fortes, inspirando a comunidade científica e tantas vidas que estão sendo renovadas.

De um leve sorriso ao riso solto, largo. Dos movimentos mais sutis aos mais surpreendentes.

Reabilitar é tornar a vida ainda maior e melhor.

PLENUM®


INOVAÇÃO PARA UMA VIDA PLENA.

A verdadeira inovação deve estar sempre a serviço de uma vida plena



Com o desenvolvimento de soluções inovadoras e de alta qualidade, a Plenum® chega para protagonizar o novo momento da implantodontia e da bioengenharia. Motivada pela ciência da vida, a instituição busca revolucionar processos, produtos, serviços e comportamentos, oferecendo soluções acessíveis com elevado grau de ciência e tecnologia.

Incorporar a cultura de inovação no DNA da Plenum® só foi possível com investimentos em pesquisas científicas, testes de eficácia da tecnologia e criação de novos modelos de atuação para atender ao mercado. Atreladas a isso, pessoas engajadas e capacitadas cuidam de cada detalhe do projeto e levam a busca do conhecimento sólido como guia para uma vida plena.

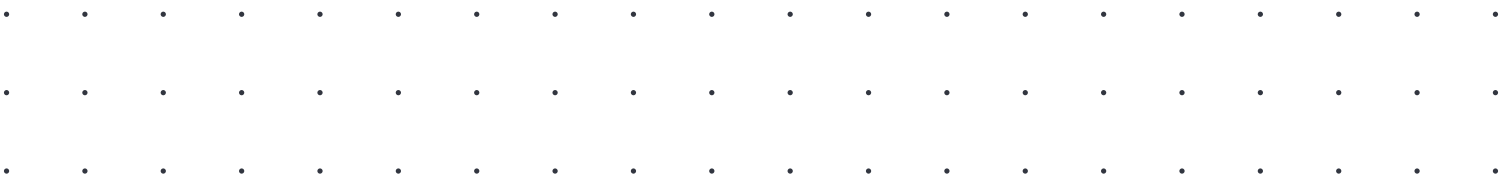

Um propósito, muitas entregas

- **SOLUÇÕES COMPLETAS E CUSTOMIZÁVEIS
PARA IMPLANTODONTIA;**
- **SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS CUSTOMIZADAS
PARA AUXÍLIO NAS CIRURGIAS;**
- **PESQUISAS, CURSOS E PALESTRAS.**

Linha Digital

A incorporação dos escâneres intraorais é uma realidade clínica cada vez mais frequente e possibilita a digitalização das arcadas dos pacientes permitindo entre as diversas funcionalidades, a transferência da posição tridimensional (3D) do implante para os softwares de planejamento. O arquivo digital obtido contém a representação virtual do implante instalado cirurgicamente com as coordenadas de posicionamento permitindo aos clínicos e laboratórios a realização de planejamentos através da utilização de softwares.

O OBJETIVO DOS COMPONENTES DIGITAIS É PROPORCIONAR UMA SOLUÇÃO PRECISA E QUE POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DIGITAIS AOS USUÁRIOS QUE DESEJAM TRABALHAR COM OS ESCANEAMENTOS OBTIDOS.



Dia a dia do **PROFISSIONAL**

A digitalização do paciente é uma alternativa ao fluxo de trabalho convencional realizado por meio das moldagens. Permite um atendimento com maior conforto e aceitação dos pacientes, agilidade no fluxo de trabalho com redução de etapas, além de uma previsibilidade maior desde o planejamento até a produção, pela possibilidade que temos de controlar os parâmetros de manufatura dos trabalhos a serem realizados.



INDICAÇÃO CLÍNICA COMPONENTES DIGITAIS



PILAR PLENUM

Prótese unitária.

Prótese cimentada no coping e parafusada no componente, que é parafusado no implante.



Ti-BASE SMART | Ti-BASE

Prótese unitária ou múltipla (até 3 elementos dentais).

Prótese Fresada. Prótese cimentada no componente e parafusada no implante.



MINI PILAR

Prótese múltipla.

Prótese parafusada no componente que é parafusado no implante.



COPING DE TITÂNIO

Prótese provisória



COPING DE TITÂNIO

Prótese provisória

PLANEJAMENTO PROTÉTICO

PLANEJAMENTO VIRTUAL



ESCANEAMENTO DO MODELO

ou



ESCANEAMENTO INTRA-ORAL
• Scanbody



BIBLIOTECA DIGITAL

- Componentes
- Análogo


PRÓTESE



MODELO

- Componente
- Análogo
- Chave de Análogo Híbrido

INSTALAÇÃO

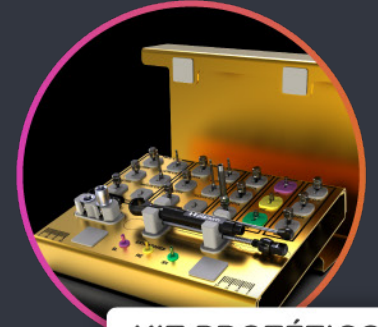

KIT PROTÉTICO

Componente Digital **SCANBODY**

Utilizado para transferir o posicionamento do implante ou componente por meio da utilização de um escâner (intraoral ou de bancada).

- ❧ Pode ser utilizado sobre implante e/ou pilar de acordo com o modelo;
- ❧ Confeccionado em PEEK, um polímero com propriedade de biocompatibilidade e opacidade, permitindo seu uso seguro e eliminando a necessidade do uso de pó para o escaneamento.



FABRICADO
em PEEK.



PARAFUSO
hexagonal 1,2mm e revestimento
DLC para maior resistência ao des-
gaste e oxidação.

**TORQUE MÁXIMO
RECOMENDADO
DE 10Ncm.**

FABRICADO
em PEEK.



DIMENSÕES

CÓDIGOS



**SCANBODY
IMPLANTE SL**

018-21-C06-20-00



**SCANBODY
IMPLANTE RE**

018-22-C06-20-00



**SCANBODY
IMPLANTE SH**

018-23-C06-20-00



**SCANBODY
Ti-BASE**

Ø3,9 018-20-C06-05-33

Ø4,5 018-20-C06-05-45



**SCANBODY
MINI PILAR**

018-20-C06-20-00



**SCANBODY
PILAR PLENUM**

Ø3,5 x 4mm 018-20-C06-50-33

Ø3,5 x 6mm 018-20-C06-51-33

Ø4,5 x 4mm 018-20-C06-50-45

Ø4,5 x 6mm 018-20-C06-51-45

Componente Ti-BASE

Permite que o planejamento das restaurações protéticas possa ser realizado virtualmente. Esse componente traz benefícios como adaptação precisa, resultados estéticos e delimitação do perfil de emergência.

- 🦷 **PRÓTESE** - Recomendado principalmente para copings e restaurações cimentadas em laboratório e aparafusadas em boca;
- 🦷 **SOFTWARE** - Integrado em softwares (CAD) que permitem o planejamento das próteses e utilização de blocos perfurados e discos para fresadoras;
- 🦷 **ALTURAS** - Diferentes alturas de transmucoso para atender as necessidades clínicas.

RESSALTO PARA INDEXAÇÃO

Garante precisão e minimiza a rotação entre a coroa e o componente.

PARAFUSO

hexagonal 1,2mm revestido com DLC.

TORQUE MÁXIMO RECOMENDADO DE 20Ncm.

OPÇÕES DE DIÂMETROS

Plataforma de assentamento com diâmetros de 3,9 e 4,5mm de acordo com espaço entre dentes e adaptação protética.



Componente Ti-BASE SMART

Componente indicado para fluxo digital, permite que o planejamento das restaurações protéticas possa ser realizado virtualmente. A função Smart possibilita ajustes de angulação até 25°, com auxílio da chave hexalobular.

- PRÓTESE** - Recomendado principalmente para copings e restaurações cimentadas em laboratório e aparafusadas em boca;
- SOFTWARE** - Integrado em softwares (CAD) que permitem o planejamento das próteses e utilização de blocos perfurados e discos para fresadoras;
- ALTURAS** - Diferentes alturas de transmucoso para atender as necessidades clínicas.

FUNÇÃO SMART

Conexão hexalobular que possibilita correção de até 25°.

OPÇÕES DE DIÂMETROS

Plataforma de assentamento com diâmetros de 3,9 e 4,5mm de acordo com espaço entre dentes e adaptação protética.

PARAFUSO

hexagonal 1,2mm revestido com DLC.

**TORQUE MÁXIMO
RECOMENDADO
DE 20Ncm.**



DIMENSÕES

CÓDIGOS



Ti-BASE SL

Ø3,9 x 1mm	018-21-C07-33-01
Ø3,9 x 2mm	018-21-C07-33-02
Ø3,9 x 3mm	018-21-C07-33-03
Ø3,9 x 4mm	018-21-C07-33-04
Ø3,9 x 5mm	018-21-C07-33-05
Ø3,9 x 6mm	018-21-C07-33-06



Ti-BASE RE

Ø3,9 x 1mm	018-22-C07-33-01
Ø3,9 x 2mm	018-22-C07-33-02
Ø3,9 x 3mm	018-22-C07-33-03
Ø3,9 x 4mm	018-22-C07-33-04
Ø3,9 x 5mm	018-22-C07-33-05
Ø3,9 x 6mm	018-22-C07-33-06
Ø4,5	
Ø4,5 x 1mm	018-22-C07-45-01
Ø4,5 x 2mm	018-22-C07-45-02
Ø4,5 x 3mm	018-22-C07-45-03
Ø4,5 x 4mm	018-22-C07-45-04
Ø4,5 x 5mm	018-22-C07-45-05
Ø4,5 x 6mm	018-22-C07-45-06




Ti-BASE SH

Ø4,5 x 1mm	018-23-C07-45-01
Ø4,5 x 2mm	018-23-C07-45-02
Ø4,5 x 3mm	018-23-C07-45-03
Ø4,5 x 4mm	018-23-C07-45-04
Ø4,5 x 5mm	018-23-C07-45-05
Ø4,5 x 6mm	018-23-C07-45-06

Componente **PILAR PLENUM**

O Pilar Plenum® é fabricado em titânio com superfície anodizada conforme a plataforma do implante. O componente protético é indicado na reabilitação protética em regiões anteriores e posteriores devido a sua variação de diâmetros, altura oclusal e transmucoso.

- INDICAÇÃO** - Próteses unitárias;
- RECOMENDAÇÃO** - Reabilitações sobre copings, cimentados em laboratório e aparafusadas sobre o pilar;
- ALTURAS** - Diferentes alturas de transmucoso para atender as necessidades clínicas.

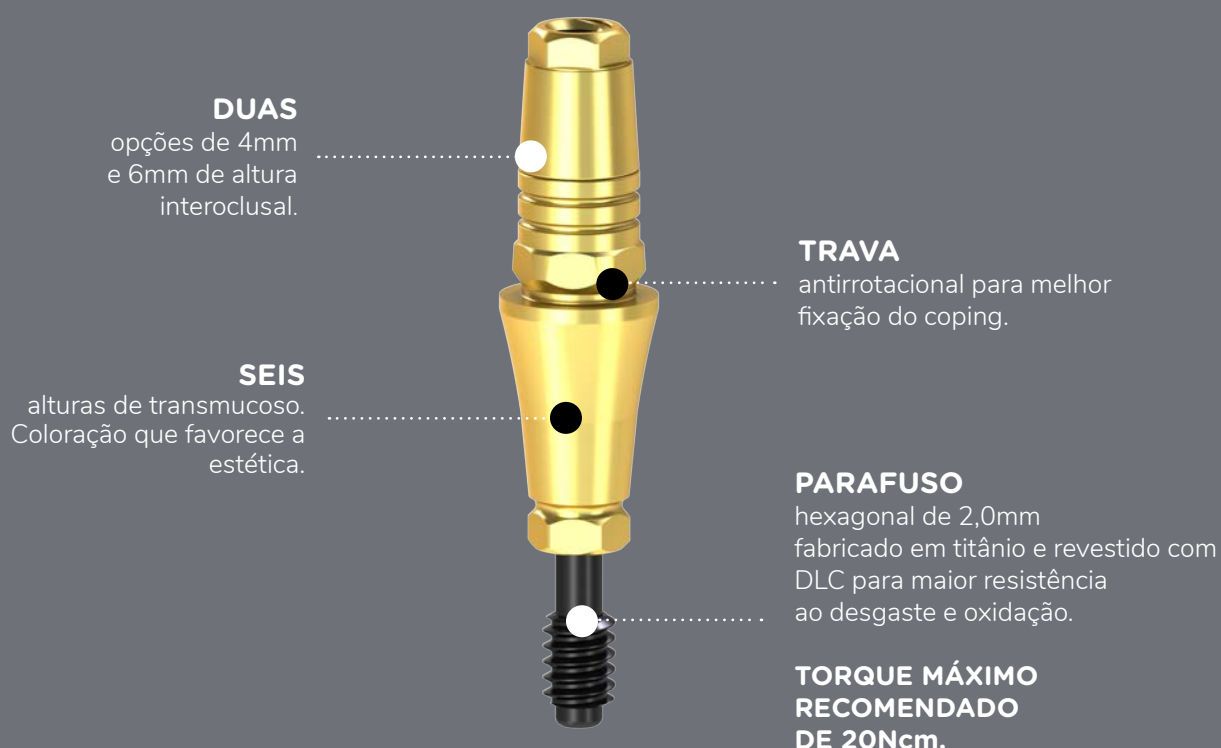

DIMENSÕES

CÓDIGOS



SLIM

4mm (altura cimentável)

Ø3,5 x 1,0mm	018-21-C50-33-01
Ø3,5 x 2,0mm	018-21-C50-33-02
Ø3,5 x 3,0mm	018-21-C50-33-03
Ø3,5 x 4,0mm	018-21-C50-33-04
Ø3,5 x 5,0mm	018-21-C50-33-05
Ø3,5 x 6,0mm	018-21-C50-33-06

6mm (altura cimentável)

Ø3,5 x 1,0mm	018-21-C51-33-01
Ø3,5 x 2,0mm	018-21-C51-33-02
Ø3,5 x 3,0mm	018-21-C51-33-03
Ø3,5 x 4,0mm	018-21-C51-33-04
Ø3,5 x 5,0mm	018-21-C51-33-05
Ø3,5 x 6,0mm	018-21-C51-33-06



REGULAR

4mm (altura cimentável)

Ø3,5 x 1,0mm	018-22-C50-33-01
Ø3,5 x 2,0mm	018-22-C50-33-02
Ø3,5 x 3,0mm	018-22-C50-33-03
Ø3,5 x 4,0mm	018-22-C50-33-04
Ø3,5 x 5,0mm	018-22-C50-33-05
Ø3,5 x 6,0mm	018-22-C50-33-06

Ø4,5 x 1,0mm	018-22-C50-45-01
Ø4,5 x 2,0mm	018-22-C50-45-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-22-C50-45-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-22-C50-45-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-22-C50-45-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-22-C50-45-06

6mm (altura cimentável)

Ø3,5 x 1,0mm	018-22-C51-33-01
Ø3,5 x 2,0mm	018-22-C51-33-02
Ø3,5 x 3,0mm	018-22-C51-33-03
Ø3,5 x 4,0mm	018-22-C51-33-04
Ø3,5 x 5,0mm	018-22-C51-33-05
Ø3,5 x 6,0mm	018-22-C51-33-06
Ø4,5 x 1,0mm	018-22-C51-45-01
Ø4,5 x 2,0mm	018-22-C51-45-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-22-C51-45-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-22-C51-45-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-22-C51-45-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-22-C51-45-06



SHORT

4mm (altura cimentável)

Ø4,5 x 1,0mm	018-23-C50-45-01
Ø4,5 x 2,0mm	018-23-C50-45-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-23-C50-45-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-23-C50-45-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-23-C50-45-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-23-C50-45-06

6mm (altura cimentável)

Ø4,5 x 1,0mm	018-23-C51-45-01
Ø4,5 x 2,0mm	018-23-C51-45-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-23-C51-45-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-23-C51-45-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-23-C51-45-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-23-C51-45-06

Componente **MINI PILAR**

O Mini Pilar é fabricado em titânio com superfície anodizada conforme plataforma do implante. Desenvolvido com design anatômico que permite um adequado condicionamento e acomodação do tecido gengival peri-implantar.

INDICAÇÃO - Próteses múltiplas;

ALTURAS - Diferentes alturas de transmucoso para atender as necessidades clínicas.

TITÂNIO
anodizado.



PARAFUSO

hexagonal de 2,0mm
fabricado em titânio e revestido com
DLC para maior resistência
ao desgaste e oxidação.

**TORQUE MÁXIMO
RECOMENDADO
DE 20Ncm.**

DIMENSÕES

CÓDIGOS



REGULAR

Ø4,8 x 1,0mm	018-22-C20-48-01
Ø4,8 x 2,0mm	018-22-C20-48-02
Ø4,8 x 3,0mm	018-22-C20-48-03
Ø4,8 x 4,0mm	018-22-C20-48-04
Ø4,8 x 5,0mm	018-22-C20-48-05
Ø4,8 x 6,0mm	018-22-C20-48-06



SHORT

Ø4,8 x 1,0mm	018-23-C20-48-01
Ø4,8 x 2,0mm	018-23-C20-48-02
Ø4,8 x 3,0mm	018-23-C20-48-03
Ø4,8 x 4,0mm	018-23-C20-48-04
Ø4,8 x 5,0mm	018-23-C20-48-05
Ø4,8 x 6,0mm	018-23-C20-48-06

Componente Laboratorial

ANÁLOGO HÍBRIDO


Representa o posicionamento do implante ou componente protético em um modelo de trabalho. Por ser cônico e possuir um canal de retenção, o análogo é facilmente inserido no encaixe do modelo e firmemente retido, garantindo precisão na etapa de prova e confecção da prótese.

- ❧ POSIÇÃO** - Representa o correto posicionamento do implante/ componente instalado em boca no modelo de trabalho;
- ❧ RECOMENDAÇÃO** - Podem ser utilizados em modelos de gesso, assim como em modelos de resina, produzidos por manufatura aditiva.



DIMENSÕES

CÓDIGOS

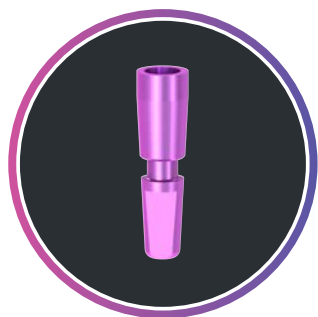


**ANÁLOGO HÍBRIDO
IMPLANTE SL**

018-21-C26-00-00



**ANÁLOGO HÍBRIDO
IMPLANTE RE**

018-22-C26-00-00

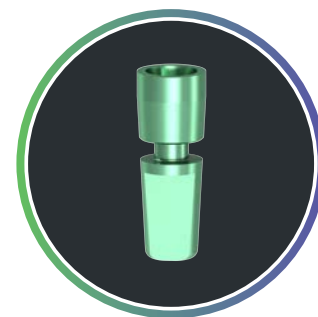

**ANÁLOGO HÍBRIDO
IMPLANTE SH**


018-23-C26-00-00



**ANÁLOGO HÍBRIDO
Ti-BASE**


Ø3,9 018-20-C26-20-39

Ø4,5 018-20-C26-20-45

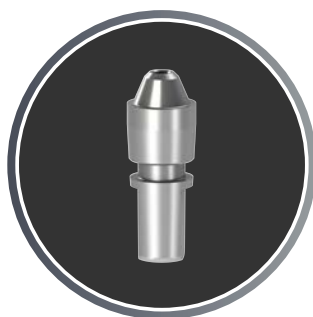

**ANÁLOGO HÍBRIDO
MINI PILAR**

018-22-C26-20-00

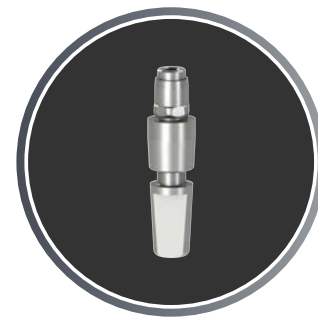


**ANÁLOGO HÍBRIDO
PILAR PLENUM**

Ø3,5 x 4mm 018-20-C26-50-33

Ø3,5 x 6mm 018-20-C26-51-33

Ø4,5 x 4mm 018-20-C26-50-45

Ø4,5 x 6mm 018-20-C26-51-45

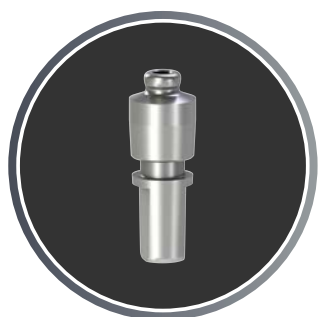

**ANÁLOGO HÍBRIDO
PILAR EQUATOR**

018-20-C26-15-00



**CHAVE ANÁLOGO
HÍBRIDO**

018-15-F20-00-34

COMPONENTES PARA IMPLANTE ODONTOLÓGICO

COMPONENTE DIGITAL

REGISTRO ANVISA - 81684340006

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-21-C06-20-00	SCANBODY IMPLANTE SL
018-22-C06-20-00	SCANBODY IMPLANTE RE
018-23-C06-20-00	SCANBODY IMPLANTE SH
018-20-C06-05-33	SCANBODY TI-BASE Ø3,9
018-20-C06-05-45	SCANBODY TI-BASE Ø4,5
018-20-C06-20-00	SCANBODY MINI PILAR
018-20-C06-50-33	SCANBODY PILAR PLENUM Ø3,5X4MM
018-20-C06-51-33	SCANBODY PILAR PLENUM Ø3,5X6MM
018-20-C06-50-45	SCANBODY PILAR PLENUM Ø4,5X4MM
018-20-C06-51-45	SCANBODY PILAR PLENUM Ø4,5X6MM

COMPONENTES PARA IMPLANTE ODONTOLÓGICO

COMPONENTES

REGISTRO ANVISA - 81684340011

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-21-C05-33-01	TI-BASE SL Ø3,9 X 1MM
018-21-C05-33-02	TI-BASE SL Ø3,9 X 2MM
018-21-C05-33-03	TI-BASE SL Ø3,9 X 3MM
018-21-C05-33-04	TI-BASE SL Ø3,9 X 4MM
018-21-C05-33-05	TI-BASE SL Ø3,9 X 5MM
018-21-C05-33-06	TI-BASE SL Ø3,9 X 6MM
018-22-C05-33-01	TI-BASE RE Ø3,9 X 1MM
018-22-C05-33-02	TI-BASE RE Ø3,9 X 2MM
018-22-C05-33-03	TI-BASE RE Ø3,9 X 3MM
018-22-C05-33-04	TI-BASE RE Ø3,9 X 4MM
018-22-C05-33-05	TI-BASE RE Ø3,9 X 5MM
018-22-C05-33-06	TI-BASE RE Ø3,9 X 6MM
018-22-C05-45-01	TI-BASE RE Ø4,5 X 1MM
018-22-C05-45-02	TI-BASE RE Ø4,5 X 2MM
018-22-C05-45-03	TI-BASE RE Ø4,5 X 3MM
018-22-C05-45-04	TI-BASE RE Ø4,5 X 4MM
018-22-C05-45-05	TI-BASE RE Ø4,5 X 5MM
018-22-C05-45-06	TI-BASE RE Ø4,5 X 6MM
018-23-C05-33-01	TI-BASE SH Ø3,9 X 1MM
018-23-C05-33-02	TI-BASE SH Ø3,9 X 2MM
018-23-C05-33-03	TI-BASE SH Ø3,9 X 3MM
018-23-C05-33-04	TI-BASE SH Ø3,9 X 4MM
018-23-C05-33-05	TI-BASE SH Ø3,9 X 5MM
018-23-C05-33-06	TI-BASE SH Ø3,9 X 6MM
018-23-C05-45-01	TI-BASE SH Ø4,5 X 1MM
018-23-C05-45-02	TI-BASE SH Ø4,5 X 2MM
018-23-C05-45-03	TI-BASE SH Ø4,5 X 3MM
018-23-C05-45-04	TI-BASE SH Ø4,5 X 4MM
018-23-C05-45-05	TI-BASE SH Ø4,5 X 5MM
018-23-C05-45-06	TI-BASE SH Ø4,5 X 6MM

COMPONENTES PARA IMPLANTE ODONTOLÓGICO

COMPONENTES

REGISTRO ANVISA - 81684340011

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-22-C20-48-01	MINI PILAR RE Ø4,8 X 1MM
018-22-C20-48-02	MINI PILAR RE Ø4,8 X 2MM
018-22-C20-48-03	MINI PILAR RE Ø4,8 X 3MM
018-22-C20-48-04	MINI PILAR RE Ø4,8 X 4MM
018-22-C20-48-05	MINI PILAR RE Ø4,8 X 5MM
018-22-C20-48-06	MINI PILAR RE Ø4,8 X 6MM
018-23-C20-48-01	MINI PILAR SH Ø4,8 X 1MM
018-23-C20-48-02	MINI PILAR SH Ø4,8 X 2MM
018-23-C20-48-03	MINI PILAR SH Ø4,8 X 3MM
018-23-C20-48-04	MINI PILAR SH Ø4,8 X 4MM
018-23-C20-48-05	MINI PILAR SH Ø4,8 X 5MM
018-23-C20-48-06	MINI PILAR SH Ø4,8 X 6MM
018-21-C50-33-01	PILAR PLENUM 4MM SL Ø3,5 X 1MM
018-21-C50-33-02	PILAR PLENUM 4MM SL Ø3,5 X 2MM
018-21-C50-33-03	PILAR PLENUM 4MM SL Ø3,5 X 3MM
018-21-C50-33-04	PILAR PLENUM 4MM SL Ø3,5 X 4MM
018-21-C50-33-05	PILAR PLENUM 4MM SL Ø3,5 X 5MM
018-21-C50-33-06	PILAR PLENUM 4MM SL Ø3,5 X 6MM
018-21-C51-33-01	PILAR PLENUM 6MM SL Ø3,5 X 1MM
018-21-C51-33-02	PILAR PLENUM 6MM SL Ø3,5 X 2MM
018-21-C51-33-03	PILAR PLENUM 6MM SL Ø3,5X 3MM
018-21-C51-33-04	PILAR PLENUM 6MM SL Ø3,5 X 4MM
018-21-C51-33-05	PILAR PLENUM 6MM SL Ø3,5 X 5MM
018-21-C51-33-06	PILAR PLENUM 6MM SL Ø3,5 X 6MM
018-22-C50-33-01	PILAR PLENUM 4MM RE Ø3,5X 1MM
018-22-C50-33-02	PILAR PLENUM 4MM RE Ø3,5 X 2MM
018-22-C50-33-03	PILAR PLENUM 4MM RE Ø3,5 X 3MM
018-22-C50-33-04	PILAR PLENUM 4MM RE Ø3,5 X 4MM
018-22-C50-33-05	PILAR PLENUM 4MM RE Ø3,5 X 5MM

COMPONENTES PARA IMPLANTE ODONTOLÓGICO

COMPONENTES

REGISTRO ANVISA - 81684340011

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-22-C50-33-06	PILAR PLENUM 4MM RE Ø3,5 X 6MM
018-22-C51-33-01	PILAR PLENUM 6MM RE Ø3,5 X 1MM
018-22-C51-33-02	PILAR PLENUM 6MM RE Ø3,5 X 2MM
018-22-C51-33-03	PILAR PLENUM 6MM RE Ø3,5 X 3MM
018-22-C51-33-04	PILAR PLENUM 6MM RE Ø3,5 X 4MM
018-22-C51-33-05	PILAR PLENUM 6MM RE Ø3,5 X 5MM
018-22-C51-33-06	PILAR PLENUM 6MM RE Ø3,5 X 6MM
018-22-C50-45-01	PILAR PLENUM 4MM RE Ø4,5 X 1MM
018-22-C50-45-02	PILAR PLENUM 4MM RE Ø4,5 X 2MM
018-22-C50-45-03	PILAR PLENUM 4MM RE Ø4,5 X 3MM
018-22-C50-45-04	PILAR PLENUM 4MM RE Ø4,5 X 4MM
018-22-C50-45-05	PILAR PLENUM 4MM RE Ø4,5 X 5MM
018-22-C50-45-06	PILAR PLENUM 4MM RE Ø4,5 X 6MM
018-22-C51-45-01	PILAR PLENUM 6MM RE Ø4,5 X 1MM
018-22-C51-45-02	PILAR PLENUM 6MM RE Ø4,5 X 2MM
018-22-C51-45-03	PILAR PLENUM 6MM RE Ø4,5 X 3MM
018-22-C51-45-04	PILAR PLENUM 6MM RE Ø4,5 X 4MM
018-22-C51-45-05	PILAR PLENUM 6MM RE Ø4,5 X 5MM
018-22-C51-45-06	PILAR PLENUM 6MM RE Ø4,5 X 6MM
018-23-C50-45-01	PILAR PLENUM 4MM SH Ø4,5 X 1MM
018-23-C50-45-02	PILAR PLENUM 4MM SH Ø4,5 X 2MM
018-23-C50-45-03	PILAR PLENUM 4MM SH Ø4,5 X 3MM
018-23-C50-45-04	PILAR PLENUM 4MM SH Ø4,5 X 4MM
018-23-C50-45-05	PILAR PLENUM 4MM SH Ø4,5 X 5MM
018-23-C50-45-06	PILAR PLENUM 4MM SH Ø4,5 X 6MM
018-23-C51-45-01	PILAR PLENUM 6MM SH Ø4,5 X 1MM
018-23-C51-45-02	PILAR PLENUM 6MM SH Ø4,5 X 2MM
018-23-C51-45-03	PILAR PLENUM 6MM SH Ø4,5 X 3MM
018-23-C51-45-04	PILAR PLENUM 6MM SH Ø4,5 X 4MM
018-23-C51-45-05	PILAR PLENUM 6MM SH Ø4,5 X 5MM
018-23-C51-45-06	PILAR PLENUM 6MM SH Ø4,5 X 6MM

INSTRUMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO

COMPONENTE LABORATORIAL ANÁLOGO HÍBRIDO

NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO ANVISA USO LABORATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-21-C26-00-00	ANÁLOGO HÍBRIDO IMPLANTE PLENUM SL
018-22-C26-00-00	ANÁLOGO HÍBRIDO IMPLANTE PLENUM RE
018-23-C26-00-00	ANÁLOGO HÍBRIDO IMPLANTE PLENUM SH
018-20-C26-20-00	ANÁLOGO HÍBRIDO MINI PILAR
018-20-C26-50-33	ANÁLOGO HÍBRIDO PILAR PLENUM Ø3,5x4mm
018-20-C26-51-33	ANÁLOGO HÍBRIDO PILAR PLENUM Ø3,5x6mm
018-20-C26-50-45	ANÁLOGO HÍBRIDO PILAR PLENUM Ø4,5x4mm
018-20-C26-51-45	ANÁLOGO HÍBRIDO PILAR PLENUM Ø4,5x6mm
018-20-C26-20-39	ANÁLOGO HÍBRIDO TI-BASE Ø3,9
018-20-C26-20-45	ANÁLOGO HÍBRIDO TI-BASE Ø4,5
018-20-C26-15-00	ANÁLOGO HÍBRIDO PILAR EQUATOR
018-15-F20-00-34	CHAVE ANÁLOGO HÍBRIDO

Suporte Plenum[®]

Oferecemos suporte técnico
especializado
em todo o território nacional,
por meio de uma equipe
profissional qualificada e apta
para esclarecer todas as suas
possíveis dúvidas.

ENTRE EM CONTATO





INOVAÇÃO PARA UMA VIDA PLENA

AV. AIN ATA, 640 – JUNDIAÍ – SP – CEP – 13212-213

 +55 11 3109 9000

 +55 11 9 7850 8427

 relacionamento@plenum.bio

www.plenum.bio

Catálogo Digital Linha Digital – Rev. 01