



**Inovação
para uma
vida plena**





CONECTAR DOIS MUNDOS APARENTEMENTE DISTANTES E PERMITIR QUE A TECNOLOGIA DEVOLVA A ESPONTANEIDADE DA VIDA.

Com esse propósito, nasceu a Plenum®. E com ela, a implanto-dontia ganha uma nova dimensão. Por trás de cada inovação, profissionais com uma absoluta paixão pelo conhecimento e um profundo encantamento pelo potencial humano. Uma mistura motivadora de gente que está revolucionando processos, produtos e serviços por meio da cocriação.

Inovando em implantes e biomateriais, a Plenum® busca a expressão do corpo em sua totalidade, da regeneração física ao bem-estar mental e social. Ao trazer soluções de excelência e torná-las acessíveis e sustentáveis, a Plenum® revoluciona o mercado e constrói vínculos fortes, inspirando a comunidade científica e tantas vidas que estão sendo renovadas.

De um leve sorriso ao riso solto, largo. Dos movimentos mais sutis aos mais surpreendentes.

Reabilitar é tornar a vida ainda maior e melhor.

PLENUM®
INOVAÇÃO PARA UMA VIDA PLENA.

A verdadeira inovação deve estar sempre a serviço de uma vida plena



Com o desenvolvimento de soluções inovadoras e de alta qualidade, a Plenum® chega para protagonizar o novo momento da implantodontia e da bioengenharia. Motivada pela ciência da vida, a instituição busca revolucionar processos, produtos, serviços e comportamentos, oferecendo soluções acessíveis com elevado grau de ciência e tecnologia.

Incorporar a cultura de inovação no DNA da Plenum® só foi possível com investimentos em pesquisas científicas, testes de eficácia da tecnologia e criação de novos modelos de atuação para atender ao mercado. Atré-ladas a isso, pessoas engajadas e capacitadas cuidam de cada detalhe do projeto e levam a busca do conhecimento sólido como guia para uma vida plena.


.....

.....

.....

Um propósito, muitas entregas

- **SOLUÇÕES COMPLETAS E CUSTOMIZÁVEIS
PARA IMPLANTODONTIA;**
- **SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS CUSTOMIZADAS
PARA AUXÍLIO NAS CIRURGIAS;**
- **PESQUISAS, CURSOS E PALESTRAS.**

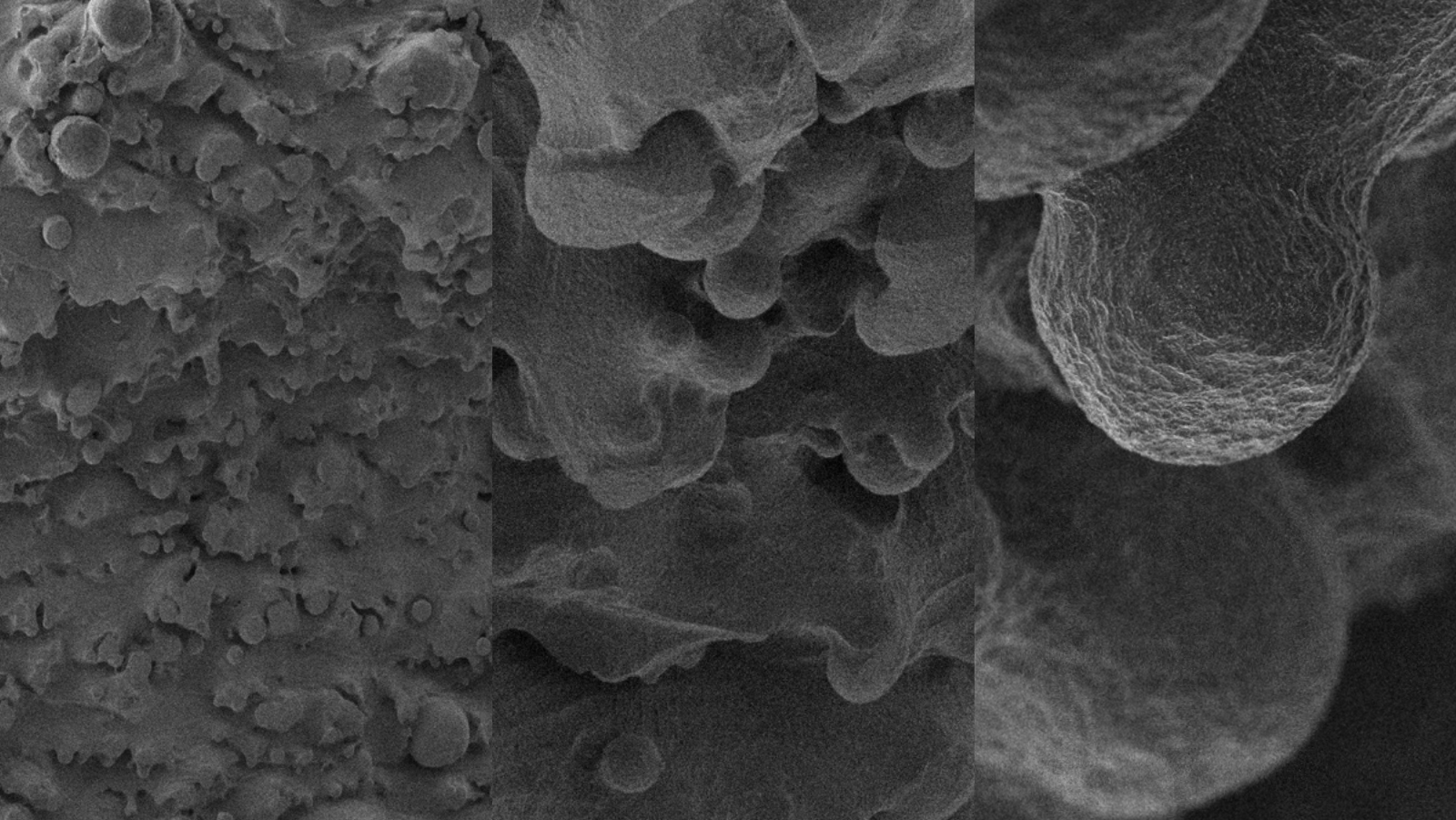

100µm — 75x

10µm — 330x

10µm — 1660x

Novos conceitos em implantodontia e bioengenharia

A Plenum® usa tecnologias inovadoras ao incorporar a manufatura aditiva ou impressão 3D ao processo de fabricação. O projeto do implante é realizado 100% em plataformas digitais, ponderando as características que são necessárias à produção.


O processo de manufatura aditiva escolhido objetiva características específicas à peça, como rugosidade e resolução de detalhes dos implantes.

IMPLANTES DENTAIS

Processo de Fabricação

O processo de manufatura aditiva escolhido objetiva características específicas à peça, como rugosidade e resolução de detalhes dos implantes. As peças resultam da aplicação de sucessivas camadas de pó de titânio que são fundidas na geometria final pela ação de um feixe de laser. A superfície obtida nas peças possui características únicas, altamente favorável à adesão celular e ao crescimento ósseo. Desta forma, a solução do Implante Dental possibilita que a osseointegração seja acelerada e perdure por mais tempo. O design foi elaborado aliando conceitos clínicos modernos e cientificamente eficazes.

COM O PROPÓSITO DE SIMPLIFICAR O PLANEJAMENTO CIRÚRGICO DO PROFISSIONAL, AS PLATAFORMAS PROTÉTICAS FORAM CATEGORIZADAS EM TRÊS DIFERENTES TIPOS, QUE SÃO DIFERENCIADAS PELA SUA GEOMETRIA E IDENTIFICADAS POR PROCESSO E COLORAÇÃO (ANODIZAÇÃO).

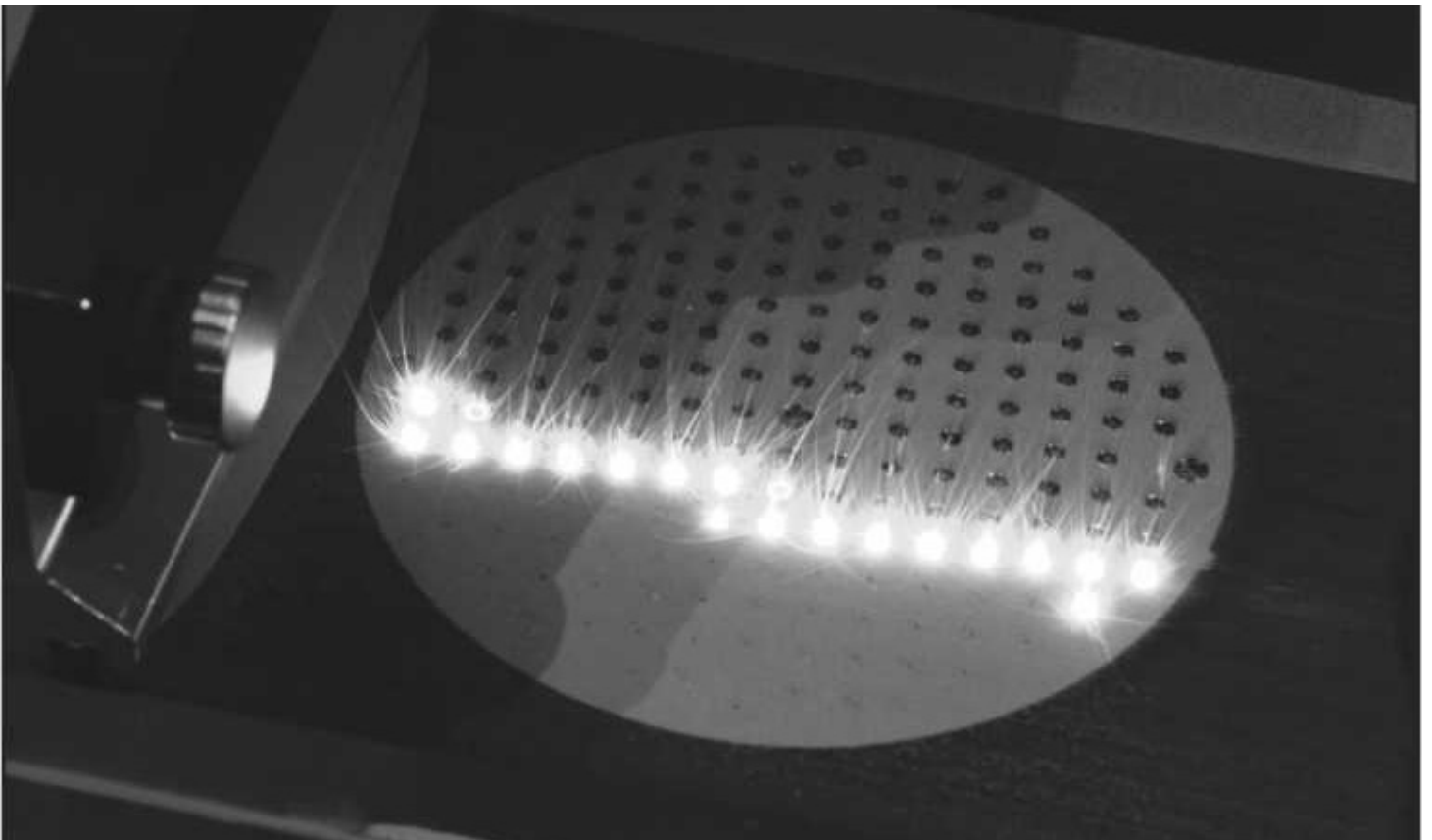

Diferenciais do Implante


SUPERFÍCIE

- Mimetiza a microestrutura do tecido ósseo (trabeculado);
- Molhabilidade controlada, permitindo a concentração dos fatores de crescimento;
- Facilita a adesão celular.

VERSATILIDADE DOS SISTEMAS

- Apenas um tipo de sistema (CM);
 - Identificação por cor para facilitar o dia a dia do dentista;
 - Diâmetros e alturas para todas as situações clínicas.
-

Plataformas de Implantes

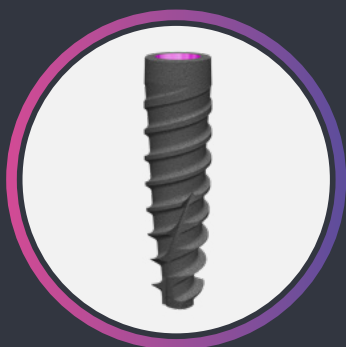

**IMPLANTE
SLIM
SL**



**IMPLANTE
REGULAR
RE**



**IMPLANTE
SHORT
SH**




**IMPLANTE
MORSEFIT
MF**



**IMPLANTE
UNIFIT
UF**




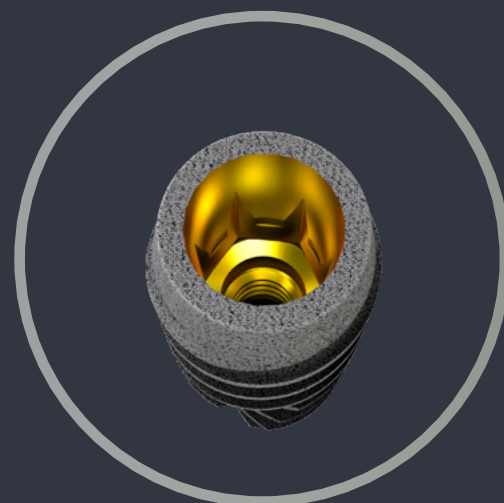


Cone Morse (angulação de 11° para RE e SL e 15° para SH) facilita a acomodação dos pilares protéticos e melhora o selamento dos tecidos peri-implantares.

TORQUE MÁXIMO RECOMENDADO:

- RE e SH 60Ncm
- SL 45Ncm

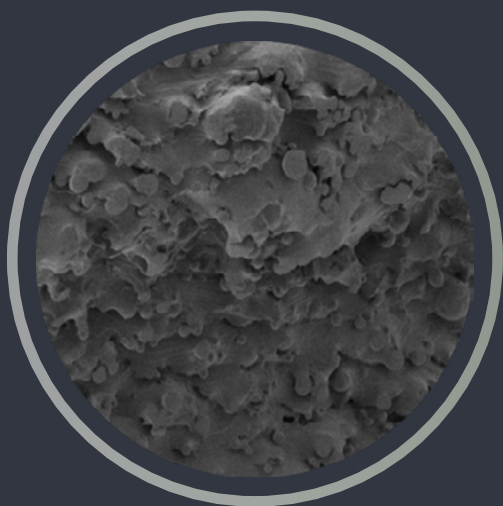


Platform Switching, potencializada pela microsuperfície Plenum® que permite uma integração e manutenção óssea eficaz.

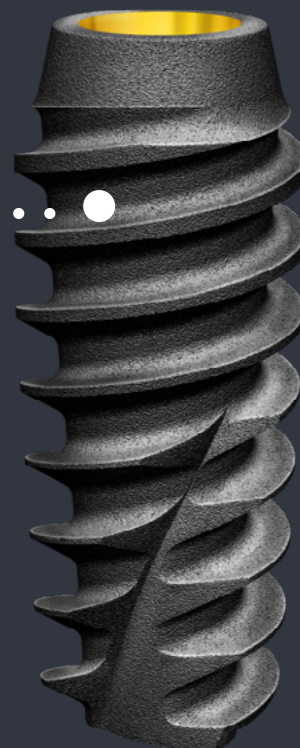




Geometria da rosca (30° e 5°) com espiras ativas que propiciam menor trauma cirúrgico e melhor estabilidade primária do implante.

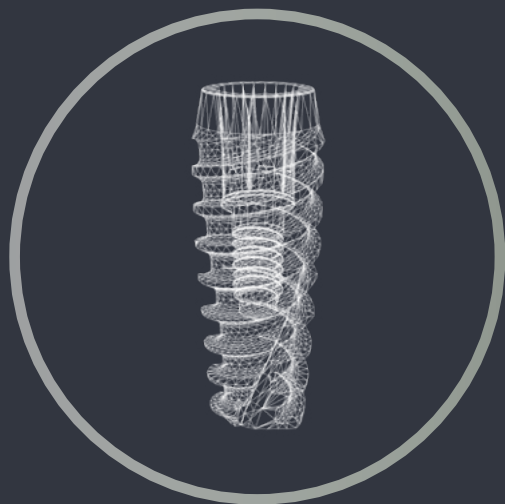

Design cilíndrico cônico.

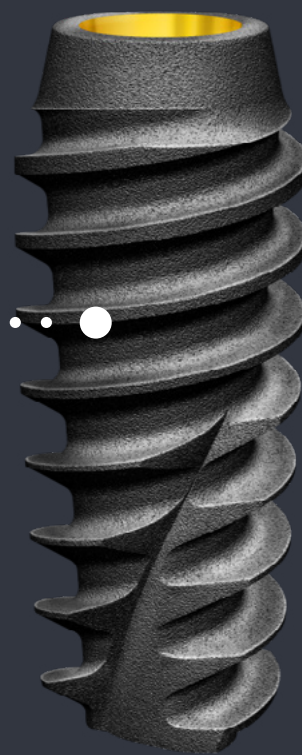




Ápice que promove excelente estabilidade primária.



**ACOMPANHA
TAPA
IMPLANTE**


Tapa implante possui 1mm de altura para facilitar a cirurgia de reabertura.

**TORQUE MÁXIMO
RECOMENDADO DE 10Ncm**

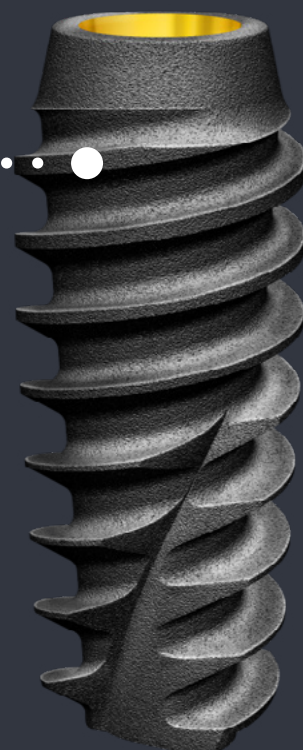

IMPLANTE

SLIM

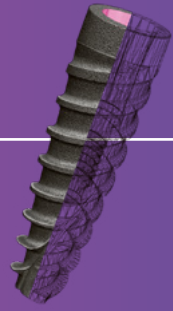


IMPLANT

REGULAR



IMPLANT

SHORT

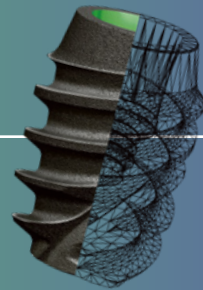


IMPLANT

MORSEFIT



IMPLANT

UNIFIT

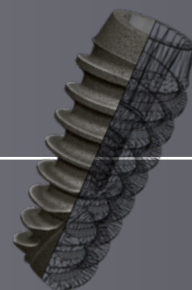



DIMENSÕES CÓDIGOS

Ø3,0 x 8,0mm

018-10-I10-30-08

Ø3,0 x 10mm

018-10-I10-30-10

Ø3,0 x 11,5mm

018-10-I10-30-11

Ø3,0 x 13,0mm

018-10-I10-30-13

Ø3,0 x 15,0mm

018-10-I10-30-15



DIMENSÕES CÓDIGOS

IMPLANTE DENTAL **REGULAR**

Ø3,5 x 8,0mm

018-10-I10-35-08

Ø3,5 x 10,0mm

018-10-I10-35-10

Ø3,5 x 11,5mm

018-10-I10-35-11

Ø3,5 x 13,0mm

018-10-I10-35-13

Ø3,5 x 15,0mm

018-10-I10-35-15

Ø4,0 x 8,0mm

018-10-I10-40-08

Ø4,0 x 10,0mm

018-10-I10-40-10

Ø4,0 x 11,5mm

018-10-I10-40-11

Ø4,0 x 13,0mm

018-10-I10-40-13

Ø4,0 x 15,0mm

018-10-I10-40-15

Ø4,5 x 8,0mm

018-10-I10-45-08

Ø4,5 x 10,0mm

018-10-I10-45-10

Ø4,5 x 11,5mm

018-10-I10-45-11

Ø4,5 x 13,0mm

018-10-I10-45-13

Ø4,5 x 15,0mm

018-10-I10-45-15

Ø5,0 x 8,0mm

018-10-I10-50-08

Ø5,0 x 10,0mm

018-10-I10-50-10

Ø5,0 x 11,5mm

018-10-I10-50-11

Ø5,0 x 13,0mm

018-10-I10-50-13

Ø6,0 x 8,0mm

018-10-I10-60-08

Ø6,0 x 10,0mm

018-10-I10-60-10



DIMENSÕES CÓDIGOS

IMPLANTE DENTAL **SHORT**

Ø4,5 x 5,0mm

018-10-I10-45-05

Ø4,5 x 6,0mm

018-10-I10-45-06

Ø4,5 x 7,0mm

018-10-I10-45-07

Ø5,0 x 5,0mm

018-10-I10-50-05

Ø5,0 x 6,0mm

018-10-I10-50-06

Ø5,0 x 7,0mm

018-10-I10-50-07

Ø6,0 x 5,0mm


018-10-I10-60-05

Ø6,0 x 6,0mm

018-10-I10-60-06

Ø6,0 x 7,0mm

018-10-I10-60-07

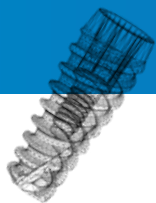

DIMENSÕES CÓDIGOS

IMPLANTE DENTAL MORSEFIT

Ø3,5 x 10mm

018-10-I19-35-10

Ø3,5 x 11,5mm

018-10-I19-35-11

Ø3,5 x 13mm

018-10-I19-35-13

Ø3,5 x 15mm

018-10-I19-35-15

Ø3,5 x 17mm

018-10-I19-35-17

Ø3,5 x 8mm

018-10-I19-35-08

Ø4,1 x 10mm

018-10-I19-41-10

Ø4,1 x 11,5mm

018-10-I19-41-11

Ø4,1 x 13mm

018-10-I19-41-13

Ø4,1 x 15mm

018-10-I19-41-15

Ø4,1 x 17mm

018-10-I19-41-17

Ø4,1 x 8mm

018-10-I19-41-08

Ø4,5 x 10mm

018-10-I19-45-10

Ø4,5 x 11,5mm

018-10-I19-45-11

Ø4,5 x 13mm

018-10-I19-45-13

Ø4,5 x 15mm

018-10-I19-45-15

Ø4,5 x 17mm

018-10-I19-45-17

Ø4,5 x 8mm

018-10-I19-45-08

Ø5,0 x 10mm

018-10-I19-50-10

Ø5,0 x 11,5mm

018-10-I19-50-11

Ø5,0 x 8mm


018-10-I19-50-08

Ø6,0 x 10mm

018-10-I19-60-10

Ø6,0 x 8mm

018-10-I19-60-08

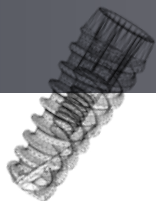

DIMENSÕES CÓDIGOS

IMPLANTE DENTAL UNIFIT

Ø3,5 x 10mm

018-10-I18-35-10

Ø3,5 x 11,5mm

018-10-I18-35-11

Ø3,5 x 13mm

018-10-I18-35-13

Ø3,5 x 15mm

018-10-I18-35-15

Ø3,5 x 8mm

018-10-I18-35-08

Ø4,0 x 10mm

018-10-I18-40-10

Ø4,0 x 11,5mm

018-10-I18-40-11

Ø4,0 x 13mm

018-10-I18-40-13

Ø4,0 x 15mm

018-10-I18-40-15

Ø4,0 x 8mm

018-10-I18-40-08

Ø4,5 x 10mm

018-10-I18-45-10

Ø4,5 x 11,5mm

018-10-I18-45-11

Ø4,5 x 13mm

018-10-I18-45-13

Ø4,5 x 15mm

018-10-I18-45-15

Ø4,5 x 8mm

018-10-I18-45-08

Ø5,0 x 10mm

018-10-I18-50-10

Ø5,0 x 11,5mm

018-10-I18-50-11

Ø5,0 x 13mm

018-10-I18-50-13

Ø5,0 x 8mm

018-10-I18-50-08


Ø6,0 x 10mm

018-10-I18-60-10

Ø6,0 x 8mm

018-10-I18-60-08

COMPONENTES

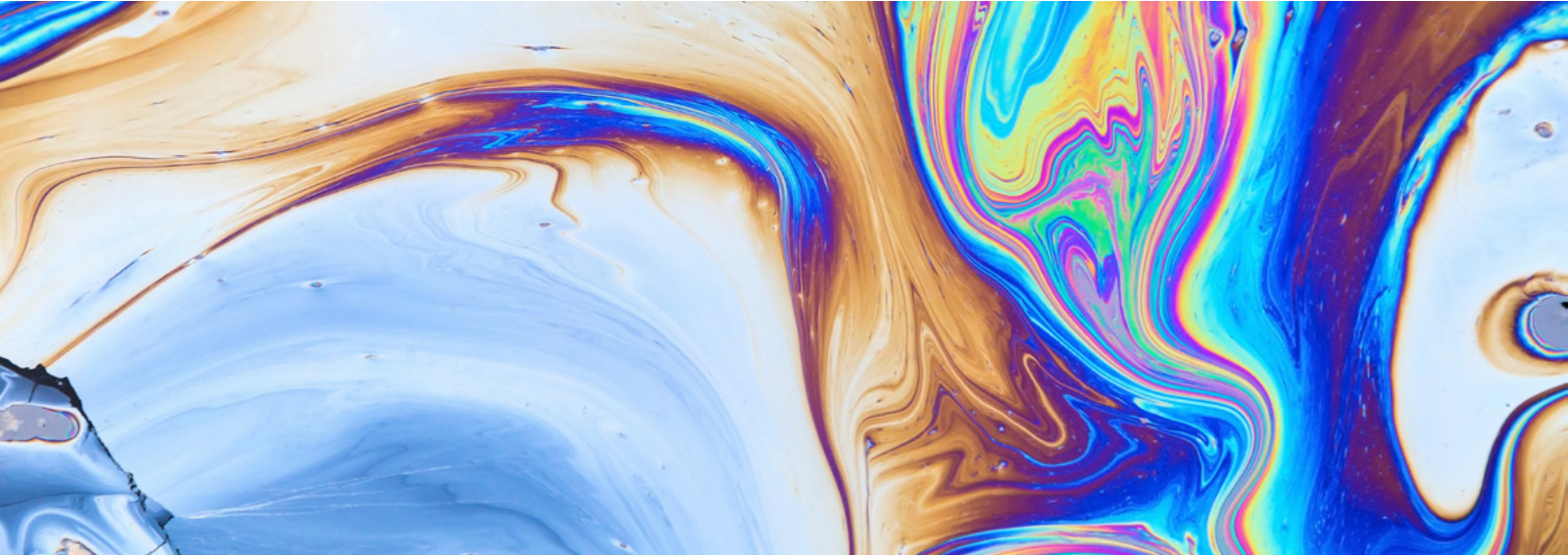

Componentes

A Plenum® atende a todas as necessidades de reabilitação protética oferecendo uma linha de componentes simplificada e ao mesmo tempo completa.

Toda a linha foi projetada para garantir estética, alto desempenho e facilidade no seu manuseio e utilização.

Os Componentes da Plenum® seguem um padrão de color code, ou seja, identificação das plataformas protéticas por meio das cores. Além disso seu design anatômico e variedade de altura de cintas, possibilita a obtenção de um perfil de emergência e saúde gengival superiores.

Outra vantagem é que todos os componentes acompanham parafuso para fixação com revestimento em DLC (Diamond-Like-Carbon), garantindo maior durabilidade e entregando a mesma eficiência de retenção com um torque reduzido.

FLOW CIRÚRGICO SLIM



CICATRIZADOR



PROVISÓRIO
SMART



PROVISÓRIO



UCLA
SMART



UCLA



Ti-BASE
SMART



Ti-BASE



PILAR PLENUM



TRANSFERENTE
MF/MA IMPLANTE



SCANBODY
IMPLANTE



SCANBODY
Ti-BASE



TRANSFERENTE
MF/MA PILAR PLENUM



SCANBODY PILAR
PLENUM



ANÁLOGO
IMPLANTE



ANÁLOGO
HÍBRIDO IMPLANTE



ANÁLOGO
HÍBRIDO Ti-BASE



ANÁLOGO PILAR
PLENUM



ANÁLOGO HÍBRIDO
PILAR PLENUM



COPING PILAR
PLENUM Ti



COPING PILAR
PLENUM (CoCr)



TAMPA PILAR
PLENUM Ti



TAMPA PILAR
PLENUM PEEK

FLOW CIRÚRGICO **REGULAR**



CICATRIZADOR



PROVISÓRIO SMART



PROVISÓRIO



UCLA SMART



UCLA



Ti-BASE SMART



PILAR PLENUM




MINI PILAR




MINI PILAR 17°




PILAR EQUATOR

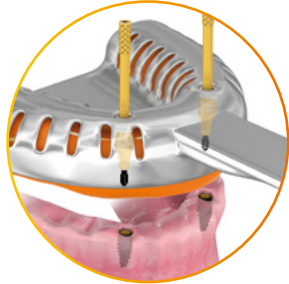


TRANSFERENTE MF/MA IMPLANTE

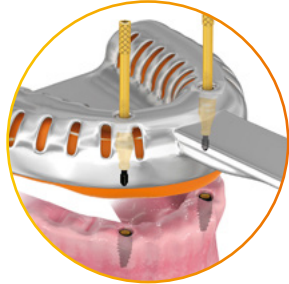


SCANBODY IMPLANTE

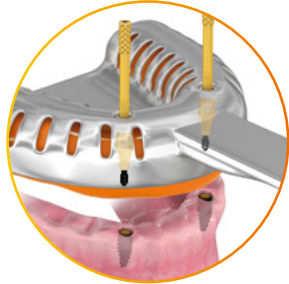


SCANBODY Ti-BASE

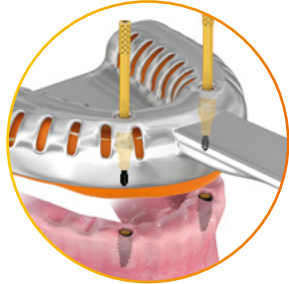


TRANSFERENTE MF/MA PILAR PLENUM

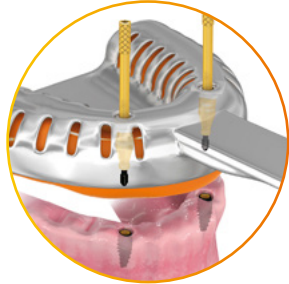


SCANBODY PILAR PLENUM

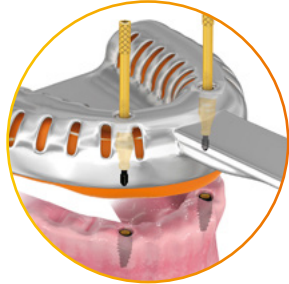

TRANSFERENTE MF/MA MINI PILAR

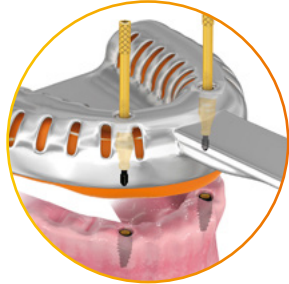

SCANBODY MINI PILAR

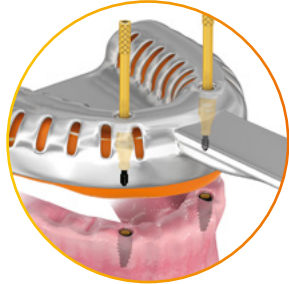

ANÁLOGO PILAR EQUATOR



ANÁLOGO IMPLANTE



ANÁLOGO HÍBRIDO IMPLANTE



ANÁLOGO HÍBRIDO Ti-BASE



ANÁLOGO PILAR PLENUM



ANÁLOGO HÍBRIDO PILAR PLENUM



ANÁLOGO MINI PILAR



ANÁLOGO HÍBRIDO MINI PILAR



DISCO DE PROTEÇÃO



CÁPULAS



COIFAS



COPING PILAR PLENUM Ti



COPING PILAR PLENUM (CoCr)



TAMPA PILAR PLENUM Ti



TAMPA PILAR PLENUM PEEK



COPING MINI PILAR Ti



COPING MINI PILAR (CoCr)



TAMPA MINI PILAR Ti



TAMPA MINI PILAR PEEK

FLOW CIRÚRGICO SHORT



CICATRIZADOR



PROVISÓRIO SMART



PROVISÓRIO



UCLA SMART



UCLA



TI-BASE SMART



TI-BASE



PILAR PLENUM



MINI PILAR



MINI PILAR 17°



PILAR EQUATOR



TRANSFERENTE MF/MA IMPLANTE



SCANBODY IMPLANTE



SCANBODY TI-BASE



TRANSFERENTE MF/MA PILAR PLENUM



SCANBODY PILAR PLENUM



TRANSFERENTE MF/MA MINI PILAR



SCANBODY MINI PILAR



ANÁLOGO PILAR EQUATOR



ANÁLOGO IMPLANTE



ANÁLOGO HÍBRIDO IMPLANTE



ANÁLOGO HÍBRIDO TI-BASE



ANÁLOGO PILAR PLENUM




ANÁLOGO HÍBRIDO PILAR PLENUM



ANÁLOGO MINI PILAR



ANÁLOGO HÍBRIDO MINI PILAR

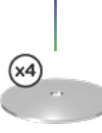

DISCO DE PROTEÇÃO



CÁPSULAS



COIFAS



COPING PILAR PLENUM Ti



COPING PILAR PLENUM (CoCr)



TAMPA PILAR PLENUM Ti



TAMPA PILAR PLENUM PEEK



COPING MINI PILAR Ti



COPING MINI PILAR (CoCr)



TAMPA MINI PILAR Ti



TAMPA MINI PILAR PEEK

INDICAÇÃO CLÍNICA PRÓTESE UNITÁRIA



CICATRIZADOR



TAPA IMPLANTE



PROVISÓRIO

PRÓTESE UNITÁRIA



UCLA

Componente para confecção de núcleo metálico fundido, parafusado diretamente sobre o implante



PILAR PLENUM

Prótese cimentada no coping e aparafusada no componente que é parafusado no implante



Ti-BASE

Prótese Fresada.
Prótese cimentada no componente e aparafusada no implante



COPING DE TITÂNIO
Prótese provisória



COPING DE CoCr
Prótese definitiva



INDICAÇÃO CLÍNICA PRÓTESE MÚLTIPLA



CICATRIZADOR



TAPA IMPLANTE



PROVISÓRIO

PRÓTESE MÚLTIPLA



MINI PILAR

Prótese múltipla
a partir 3 elementos dentais

Prótese cimentada no coping
e aparafusada no componente
que é parafusado no implante



PILAR EQUATOR

**Prótese removível
implantossuportada.**

Coifa fixa na prótese,
retida mecanicamente
ao componente por
intermédio da cápsula.



COPING DE TITÂNIO

Prótese provisória




COPING DE CoCr

Prótese definitiva



PLANEJAMENTO PROTÉTICO

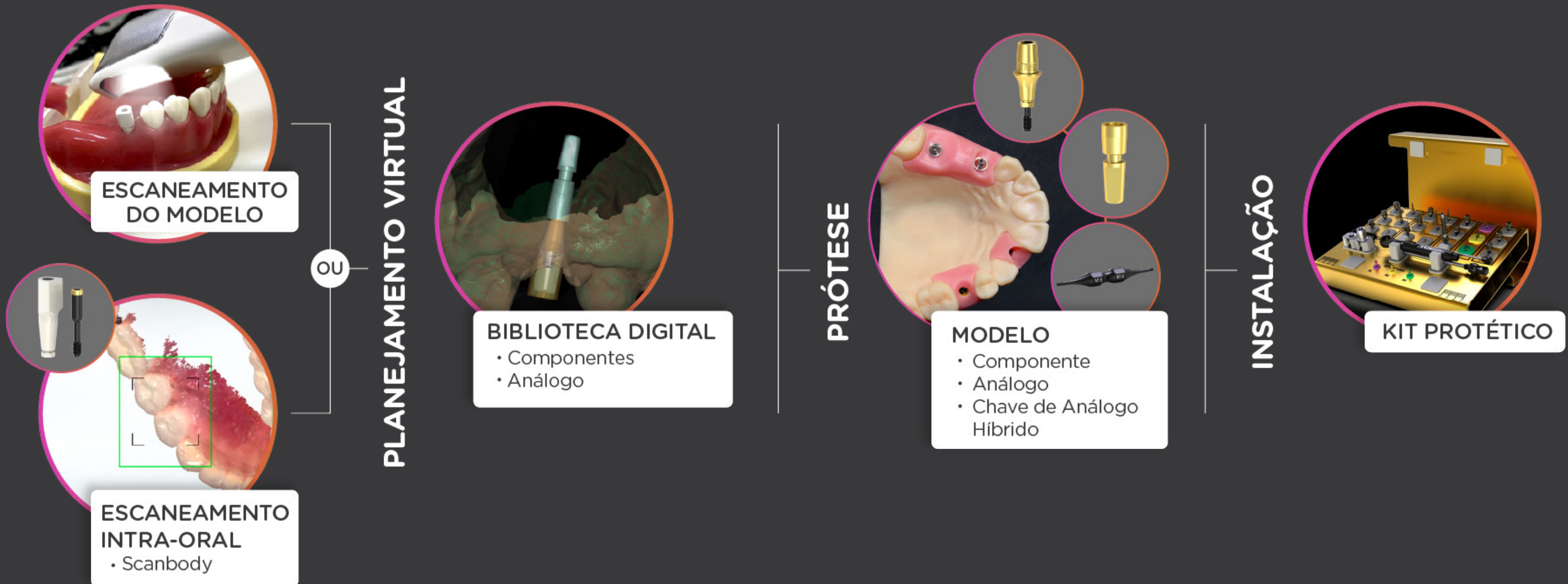


CICATRIZADOR

O Cicatrizador tem a finalidade de guiar, manter e condicionar a adequada cicatrização do tecido gengival peri-implantar após a instalação do implante dental. O componente é formado pelo corpo transmucoso em polímero PEEK e o parafuso de fixação em liga de titânio anodizado conforme plataforma do implante.



PEEK
poliéter-éter-cetona.

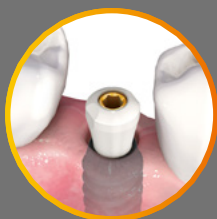

CINCO
alturas de
transmucoso.



TOPO DO PARAFUSO

anodizado com a mesma cor da interface protética do implante.



PARAFUSO

hexagonal 1,2mm e revestimento DLC para maior resistência ao desgaste e oxidação.

TORQUE MÁXIMO RECOMENDADO DE 10Ncm.



NOTA

Para fixação do parafuso, é indicado a utilização da Chave Digital Hexagonal 1,2mm.



DIMENSÕES CÓDIGOS



Ø4,5 x 2,0mm	018-23-C01-45-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-23-C01-45-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-23-C01-45-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-23-C01-45-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-23-C01-45-06

Ø5,5 x 2,0mm	018-23-C01-55-02
Ø5,5 x 3,0mm	018-23-C01-55-03
Ø5,5 x 4,0mm	018-23-C01-55-04
Ø5,5 x 5,0mm	018-23-C01-55-05
Ø5,5 x 6,0mm	018-23-C01-55-06

A rectangular array of dots arranged in 4 rows and 20 columns. Each row contains 20 dots, and there are 4 rows in total, resulting in a total of 80 dots.

PROVISÓRIO SMART

O Provisório Smart é composto por corpo em titânio com superfície anodizada conforme a plataforma do implante, complemento em PEEK e acesso fácil para o torque do parafuso. Compatível com resinas fotopolimerizáveis.



COMPLEMENTO PEEK

com marcações de altura a cada 1mm. Facilita a adesão e captura da coroa provisória.



SEIS

alturas de transmucoso. Coloração que favorece a estética.



POSSIBILIDADE

de ajuste da angulação em até 25° com chave hexalobular.



PARAFUSO

fabricado em titânio e revestido com DLC para maior resistência ao desgaste e oxidação.




TORQUE MÁXIMO RECOMENDADO DE 20Ncm.



NOTA

Para fixação do parafuso, é indicado a utilização da Chave Hexalobular 1,2mm para catraca ou contra ângulo (CA).

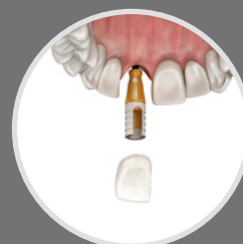

DIMENSÕES CÓDIGOS



Ø4,5 x 1,0mm	018-23-C62-33-01
Ø4,5 x 2,0mm	018-23-C62-33-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-23-C62-33-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-23-C62-33-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-23-C62-33-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-23-C62-33-06

Ø4,5 x 1,0mm	018-22-C62-45-01
Ø4,5 x 2,0mm	018-22-C62-45-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-22-C62-45-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-22-C62-45-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-22-C62-45-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-22-C62-45-06

A 10x10 grid of dots on a white background. The dots are arranged in 10 rows and 10 columns, forming a square pattern. Each dot is a small black circle. The grid is centered on the page.

PROVISÓRIO

O Provisório é composto por corpo em titânio com superfície anodizada conforme a plataforma do implante, complemento em PEEK. Compatível com resinas fotopolimerizáveis.



SEIS
alturas de transmucoso.
Coloração que favorece a
estética.



COMPLEMENTO PEEK

com marcações de altura a
cada 1mm.
Facilita a adesão e captura da
coroa provisória.



PARAFUSO

fabricado em titânio e revestido
com DLC para maior resistência
ao desgaste e oxidação.

**TORQUE MÁXIMO
RECOMENDADO
DE 20Ncm.**



NOTA

Para fixação do parafuso, é indicado a utilização da Chave Hexagonal 1,2mm para catraca ou contra ângulo (CA).



DIMENSÕES CÓDIGOS



Ø4,5 x 1,0mm	018-23-C60-33-01
Ø4,5 x 2,0mm	018-23-C60-33-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-23-C60-33-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-23-C60-33-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-23-C60-33-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-23-C60-33-06

Ø4,5 x 1,0mm	018-22-C60-45-01
Ø4,5 x 2,0mm	018-22-C60-45-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-22-C60-45-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-22-C60-45-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-22-C60-45-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-22-C60-45-06

A 10x10 grid of dots on a white background. The dots are arranged in 10 rows and 10 columns, forming a square pattern. Each dot is a small black circle. The grid is composed of 100 dots in total.

UCLA SMART

O UCLA Smart é fabricado em cromo cobalto e complemento em acrílico e acesso fácil para o torque do parafuso ideal para sobrefundição protética. Seu parafuso é anodizado conforme a plataforma do implante.



CONEXÃO

hexalobular que possibilita correção de até 25°.



REVESTIMENTO


DLC para maior resistência ao desgaste e oxidação.

**TORQUE MÁXIMO
RECOMENDADO
DE 20Ncm.**



ACRÍLICO

com indicação de altura a cada 1mm.

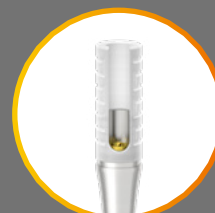

SEIS

alturas de transmucoso.



NOTA

Para fixação do parafuso, é indicado a utilização da Chave Hexalobular 1,2mm para catraca ou contra ângulo (CA).



DIMENSÕES CÓDIGOS



Ø4,5 x 1,0mm	018-23-C11-33-01
Ø4,5 x 2,0mm	018-23-C11-33-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-23-C11-33-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-23-C11-33-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-23-C11-33-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-23-C11-33-06

Ø4,5 x 1,0mm	018-22-C11-45-01
Ø4,5 x 2,0mm	018-22-C11-45-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-22-C11-45-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-22-C11-45-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-22-C11-45-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-22-C11-45-06


A 10x10 grid of dots on a white background. The dots are arranged in 10 rows and 10 columns, forming a square pattern. Each dot is a small black circle. The grid is centered on the page.

UCLA

O UCLA é fabricado em cromo cobalto e complemento em acrílico, ideal para sobrefundição protética. Seu parafuso é anodizado conforme a plataforma do implante.



ACRÍLICO
com indicação de altura
a cada 1mm.

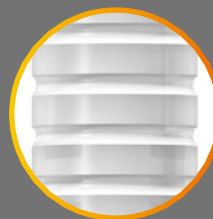

SEIS
alturas de transmucoso.

REVESTIMENTO
DLC para maior resistência ao
desgaste e oxidação.

**TORQUE MÁXIMO
RECOMENDADO
DE 20Ncm.**



NOTA

Para fixação do parafuso, é indicado a utilização da Chave Hexagonal 1,2mm para catraca ou contra ângulo (CA).



DIMENSÕES CÓDIGOS



Ø4,5 x 1,0mm	018-23-C10-33-01
Ø4,5 x 2,0mm	018-23-C10-33-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-23-C10-33-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-23-C10-33-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-23-C10-33-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-23-C10-33-06

Ø4,5 x 1,0mm	018-22-C10-45-01
Ø4,5 x 2,0mm	018-22-C10-45-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-22-C10-45-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-22-C10-45-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-22-C10-45-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-22-C10-45-06

A 10x10 grid of dots on a white background. The dots are arranged in 10 rows and 10 columns, forming a square pattern. Each dot is a small black circle. The grid is centered on the page.

Ti-BASE SMART

Componente indicado para fluxo digital, permite que o planejamento das restaurações protéticas possa ser realizado virtualmente. A função Smart possibilita ajustes de angulação até 25°, com auxílio da chave hexalobular. Além da previsibilidade dos resultados, benefícios como adaptação precisa, resultados estéticos e delimitação do perfil de emergência garantem sucesso e durabilidade dos tratamentos realizados.



CONEXÃO
hexalobular que possibilita
correção de até 25°.



OPÇÕES DE DIÂMETROS
Plataforma de assentamento
com diâmetros de 3,9 e 4,5mm
de acordo com espaço entre
dentes e adaptação protética.



REVESTIMENTO
DLC para maior resistência ao
desgaste e oxidação.

**TORQUE MÁXIMO
RECOMENDADO
DE 20Ncm.**



NOTA

Para fixação do parafuso, é indicado a utilização da Chave Hexalobular 1,2mm para catraca ou contra ângulo (CA).

DIMENSÕES CÓDIGOS



Ø4,5 x 1,0mm	018-23-C07-45-01
Ø4,5 x 2,0mm	018-23-C07-45-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-23-C07-45-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-23-C07-45-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-23-C07-45-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-23-C07-45-06

Ø4,5 x 1,0mm	018-22-C07-45-01
Ø4,5 x 2,0mm	018-22-C07-45-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-22-C07-45-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-22-C07-45-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-22-C07-45-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-22-C07-45-06

A 10x10 grid of dots on a white background. The dots are arranged in 10 rows and 10 columns, forming a square pattern. Each dot is a small black circle. The grid is composed of 100 dots in total.

Ti-BASE

Componente indicado para fluxo digital, permite que o planejamento das restaurações protéticas possa ser realizado virtualmente. Além da previsibilidade dos resultados, benefícios como adaptação precisa, resultados estéticos e delimitação do perfil de emergência garantem sucesso e durabilidade dos tratamentos realizados.



RESSALTO PARA INDEXAÇÃO

Garante precisão e minimiza a rotação entre a coroa e o componente.



OPÇÕES DE DIÂMETROS

Plataforma de assentamento com diâmetros de 3,9 e 4,5mm de acordo com espaço entre dentes e adaptação protética.



REVESTIMENTO

DLC para maior resistência ao desgaste e oxidação.

TORQUE MÁXIMO RECOMENDADO DE 20Ncm.



NOTA

Para fixação do parafuso, é indicado a utilização da Chave Hexagonal 1,2mm para catraca ou contra ângulo (CA).

DIMENSÕES CÓDIGOS



Ti-BASE RE

Ti-BASE SH

Ø4,5 x 1mm	018-23-C05-45-01
Ø4,5 x 2mm	018-23-C05-45-02
Ø4,5 x 3mm	018-23-C05-45-03
Ø4,5 x 4mm	018-23-C05-45-04
Ø4,5 x 5mm	018-23-C05-45-05
Ø4,5 x 6mm	018-23-C05-45-06

PILAR PLENUM®

O Pilar Plenum® é fabricado em titânio com superfície anodizada conforme a plataforma do implante. O componente protético é indicado na reabilitação protética em regiões anteriores e posteriores devido a sua variação de diâmetros, altura oclusal e transmucoso.

COLORAÇÃO
que favorece a estética.




TRAVA
antirrotacional para melhor
fixação do coping.

DUAS
opções de 4mm e 6mm
de altura interoclusal.

SEIS
alturas de transmucoso.

PARAFUSO
hexagonal de 2,0mm fabricado em ti-
tânio e revestido com DLC para maior
resistência ao desgaste e oxidação.

**TORQUE MÁXIMO
RECOMENDADO
DE 20Ncm.**

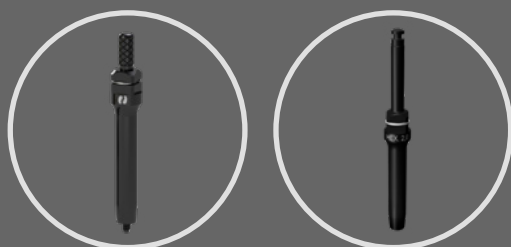

NOTA

Para fixação do parafuso, é indicado a utilização da Chave Hexagonal 2,0mm para catraca ou contra ângulo (CA).

PLATAFORMA

DIMENSÕES CÓDIGOS



SLIM

4mm (altura cimentável)

Ø3,5 x 1,0mm	018-21-C50-33-01
Ø3,5 x 2,0mm	018-21-C50-33-02
Ø3,5 x 3,0mm	018-21-C50-33-03
Ø3,5 x 4,0mm	018-21-C50-33-04
Ø3,5 x 5,0mm	018-21-C50-33-05
Ø3,5 x 6,0mm	018-21-C50-33-06

6mm (altura cimentável)

Ø3,5 x 1,0mm	018-21-C51-33-01
Ø3,5 x 2,0mm	018-21-C51-33-02
Ø3,5 x 3,0mm	018-21-C51-33-03
Ø3,5 x 4,0mm	018-21-C51-33-04
Ø3,5 x 5,0mm	018-21-C51-33-05
Ø3,5 x 6,0mm	018-21-C51-33-06



REGULAR

4mm (altura cimentável)

Ø3,5 x 1,0mm	018-22-C50-33-01
Ø3,5 x 2,0mm	018-22-C50-33-02
Ø3,5 x 3,0mm	018-22-C50-33-03
Ø3,5 x 4,0mm	018-22-C50-33-04
Ø3,5 x 5,0mm	018-22-C50-33-05
Ø3,5 x 6,0mm	018-22-C50-33-06

Ø4,5 x 1,0mm	018-22-C50-45-01
Ø4,5 x 2,0mm	018-22-C50-45-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-22-C50-45-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-22-C50-45-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-22-C50-45-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-22-C50-45-06

6mm (altura cimentável)

Ø3,5 x 1,0mm	018-22-C51-33-01
Ø3,5 x 2,0mm	018-22-C51-33-02
Ø3,5 x 3,0mm	018-22-C51-33-03
Ø3,5 x 4,0mm	018-22-C51-33-04
Ø3,5 x 5,0mm	018-22-C51-33-05
Ø3,5 x 6,0mm	018-22-C51-33-06

Ø4,5 x 1,0mm	018-22-C51-45-01
Ø4,5 x 2,0mm	018-22-C51-45-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-22-C51-45-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-22-C51-45-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-22-C51-45-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-22-C51-45-06



SHORT

4mm (altura cimentável)


Ø4,5 x 1,0mm	018-23-C50-45-01
Ø4,5 x 2,0mm	018-23-C50-45-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-23-C50-45-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-23-C50-45-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-23-C50-45-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-23-C50-45-06

6mm (altura cimentável)

Ø4,5 x 1,0mm	018-23-C51-45-01
Ø4,5 x 2,0mm	018-23-C51-45-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-23-C51-45-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-23-C51-45-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-23-C51-45-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-23-C51-45-06

MINI PILAR

O Mini Pilar é fabricado em titânio com superfície anodizada conforme plataforma do implante. Desenvolvido com design anatômico que permite um adequado condicionamento e acomodação do tecido gengival peri-implantar.

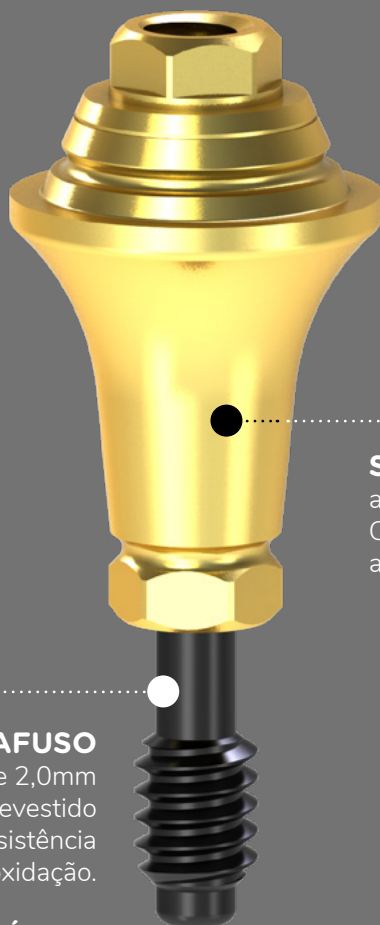

SEIS

alturas de transmucoso. Coloração que favorece a estética.



PARAFUSO

hexagonal de 2,0mm fabricado em titânio e revestido com DLC para maior resistência ao desgaste e oxidação.

**TORQUE MÁXIMO
RECOMENDADO
DE 20Ncm.**



NOTA

Para fixação do parafuso, é indicado a utilização da Chave Hexagonal 2,0mm para catraca ou contra ângulo (CA).



NOTA

Componente ideal para reabilitações múltiplas.

PLATAFORMA

DIMENSÕES CÓDIGOS




REGULAR

Ø4,8 x 1,0mm	018-22-C20-48-01
Ø4,8 x 2,0mm	018-22-C20-48-02
Ø4,8 x 3,0mm	018-22-C20-48-03
Ø4,8 x 4,0mm	018-22-C20-48-04
Ø4,8 x 5,0mm	018-22-C20-48-05
Ø4,8 x 6,0mm	018-22-C20-48-06



SHORT

Ø4,8 x 1,0mm	018-23-C20-48-01
Ø4,8 x 2,0mm	018-23-C20-48-02
Ø4,8 x 3,0mm	018-23-C20-48-03
Ø4,8 x 4,0mm	018-23-C20-48-04
Ø4,8 x 5,0mm	018-23-C20-48-05
Ø4,8 x 6,0mm	018-23-C20-48-06

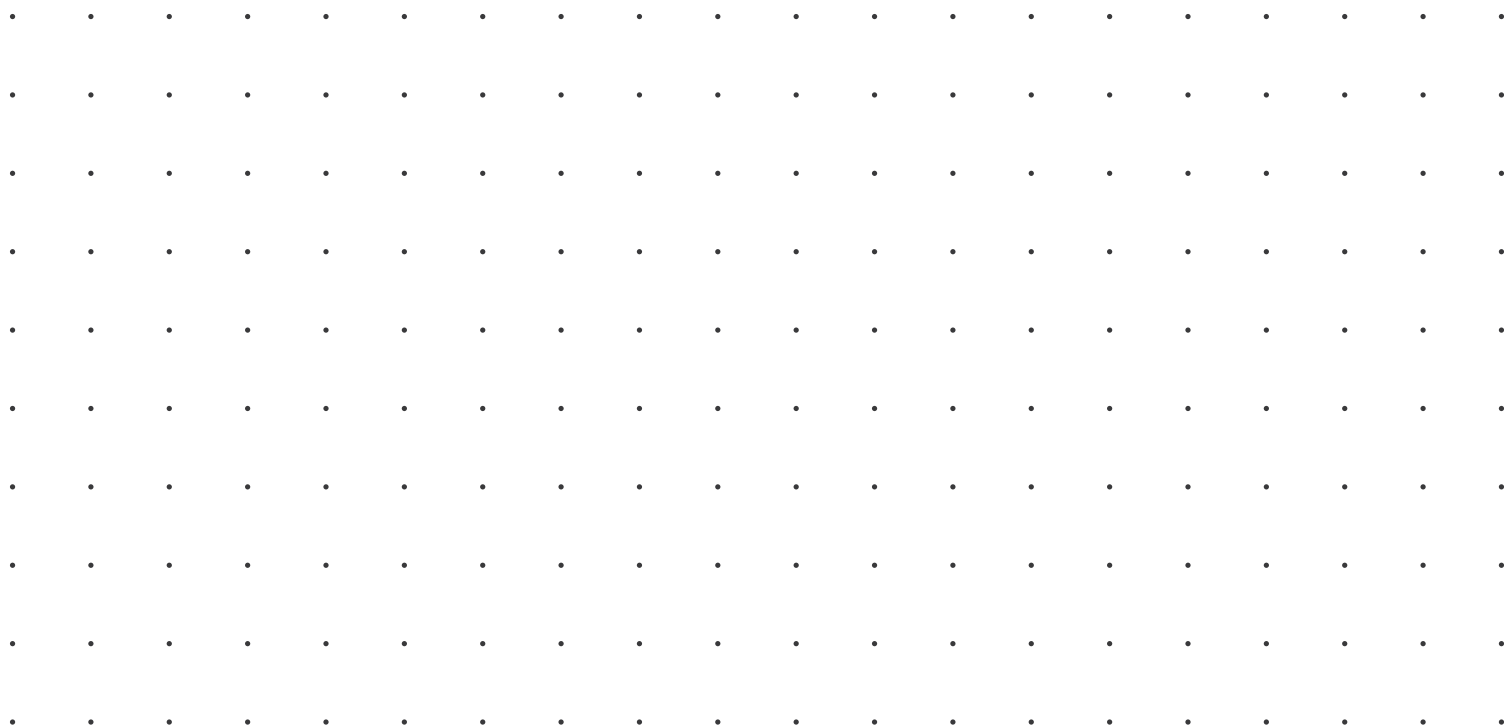

MINI PILAR 17°

O Mini Pilar 17° é fabricado em titânio com superfície anodizada conforme plataforma do implante. Desenvolvido com angulação de 17°, que favorece a correção em implantes inseridos inclinados.

ANGULAÇÃO
de 17°.



PARAFUSO

hexagonal de 1,2mm fabricado em titânio e revestido com DLC para maior resistência ao desgaste e oxidação.

**TORQUE MÁXIMO
RECOMENDADO
DE 20Ncm.**



QUATRO

alturas de transmucoso.
Coloração que favorece
a estética.



NOTA

Para fixação do parafuso, é indicado a utilização da Chave Hexagonal 1,2mm para catraca ou contra ângulo (CA).



NOTA

Componente ideal para reabilitações múltiplas sobre implantes inclinados.

DIMENSÕES CÓDIGOS



Ø4,8 x 2,0mm	018-23-C21-48-02
Ø4,8 x 3,0mm	018-23-C21-48-03
Ø4,8 x 4,0mm	018-23-C21-48-04
Ø4,8 x 5,0mm	018-23-C21-48-05



PILAR EQUATOR


O Pilar Equator foi desenvolvido com a função de fixar e reter próteses dentárias móveis implantossuportadas. O componente conta com design anatômico, que permite um adequado condicionamento e acomodação do tecido gengival peri-implantar.

CONEXÃO
hexagonal de 1,2mm.

**TOQUE MÁXIMO
RECOMENDADO
DE 20Ncm.**




TOPO
revestido com DLC para
maior resistência ao des-
gaste e oxidação.

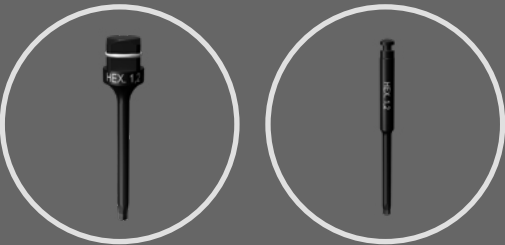

NOTA

Para fixação do parafuso, é indicado a utilização da Chave Hexagonal 1,2mm para catraca ou contra ângulo (CA).

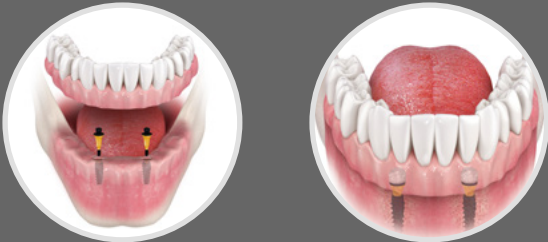

PLATAFORMA

DIMENSÕES CÓDIGOS



REGULAR

Ø4,5 x 1,0mm	018-22-C15-45-01
Ø4,5 x 2,0mm	018-22-C15-45-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-22-C15-45-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-22-C15-45-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-22-C15-45-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-22-C15-45-06



SHORT

Ø4,5 x 1,0mm	018-23-C15-45-01
Ø4,5 x 2,0mm	018-23-C15-45-02
Ø4,5 x 3,0mm	018-23-C15-45-03
Ø4,5 x 4,0mm	018-23-C15-45-04
Ø4,5 x 5,0mm	018-23-C15-45-05
Ø4,5 x 6,0mm	018-23-C15-45-06




SCANBODY

O Scanbody tem como objetivo transferir o posicionamento do implante/componente instalado no paciente para que seja possível realizar o planejamento das restaurações protéticas provisórias ou definitivas. Por meio da utilização do escâner intraoral ou escâner de bancada, é realizada uma captura do posicionamento do implante e em software de planejamento (CAD), os arquivos são complementados com a identificação da biblioteca virtual, que contém as informações dos componentes protéticos correspondentes ao implante instalado, tais como os pilares Ti-Base.

CONFECCIONADO

em PEEK, um polímero biocompatível com alta opacidade, permitindo seu uso seguro.

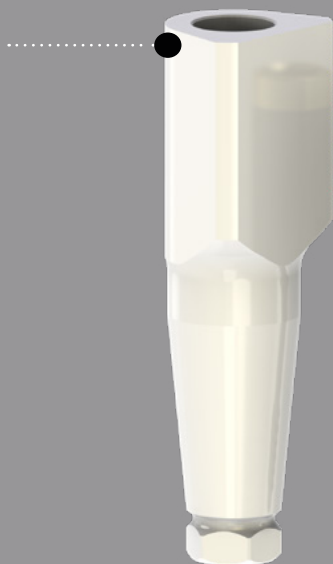

PARAFUSO

hexagonal 1,2mm e revestimento DLC para maior resistência ao desgaste e oxidação.

**TORQUE MÁXIMO
RECOMENDADO
DE 10Ncm.**



NOTA

Para fixação do parafuso, é indicado a utilização da Chave Hexagonal 1,2mm para catraca ou contra ângulo (CA).



PLATAFORMA

DIMENSÕES CÓDIGOS



**SCANBODY
IMPLANTE SL**

018-21-C06-20-00



**SCANBODY
IMPLANTE RE**

018-22-C06-20-00



**SCANBODY
IMPLANTE SH**

018-23-C06-20-00



**SCANBODY
Ti-BASE**

Ø3,9 018-20-C06-05-33

Ø4,5 018-20-C06-05-45



**SCANBODY
MINI PILAR**

018-20-C06-20-00



**SCANBODY
PILAR PLENUM®**

Ø3,5 x 4mm 018-20-C06-50-33

Ø3,5 x 6mm 018-20-C06-51-33

Ø4,5 x 4mm 018-20-C06-50-45

Ø4,5 x 6mm 018-20-C06-51-45

TRANSFERENTE MF/MA IMPLANTE

O Transferente MF/MA apresenta corpo estruturado para utilização em técnicas de moldagem aberta ou fechada. O componente é fabricado em titânio com superfície anodizada conforme plataforma do implante. Possui clip para melhor precisão de posicionamento do transferente na moldagem.

PARAFUSO
para moldeira fechada, hexágon
gono 1,2mm e revestimento
DLC para maior resistência ao
desgaste e oxidação.

**TORQUE MÁXIMO
RECOMENDADO
DE 20Ncm.**





INDEXAÇÃO
hexagonal para garantir
a correta transferência da
posição do implante.

PARAFUSO
hexágono de 1,2mm
para moldeira aberta com
ranhuras para facilitar a
pré-inserção manual do
parafuso.



NOTA

Para fixação do parafuso, é indicado a utilização da Chave Hexagonal 1,2mm para catraca ou contra ângulo (CA).

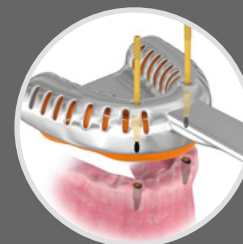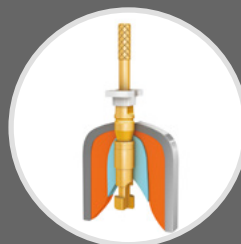

PLATAFORMA

DIMENSÃO CÓDIGO



SLIM

Ø3,5mm


018-21-C32-00-00



REGULAR

Ø3,5mm

018-22-C32-00-00

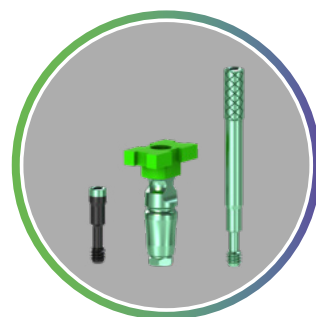

SHORT


Ø3,5mm

018-23-C32-00-00

A 10x10 grid of dots on a white background. The dots are arranged in a regular pattern, with 10 dots per row and 10 dots per column, totaling 100 dots. The dots are small, black, and evenly spaced.

ANÁLOGO HÍBRIDO

Mesmo com a utilização do fluxo digital, a confecção de modelos é importante para que as etapas de acabamento e conferência oclusal possam ser realizadas com precisão. Os análogos híbridos representam o posicionamento do implante ou componente protético em um modelo de trabalho confeccionado em gesso ou resina. A geometria do corpo externo no componente foi desenvolvida visando alcançar propriedades fundamentais para a usabilidade do fluxo digital, tais como precisão, estabilidade e retenção. Por ser cônico e possuir um canal de retenção, o análogo é facilmente inserido no encaixe do modelo e firmemente retido, garantindo precisão na etapa de prova e confecção da prótese.

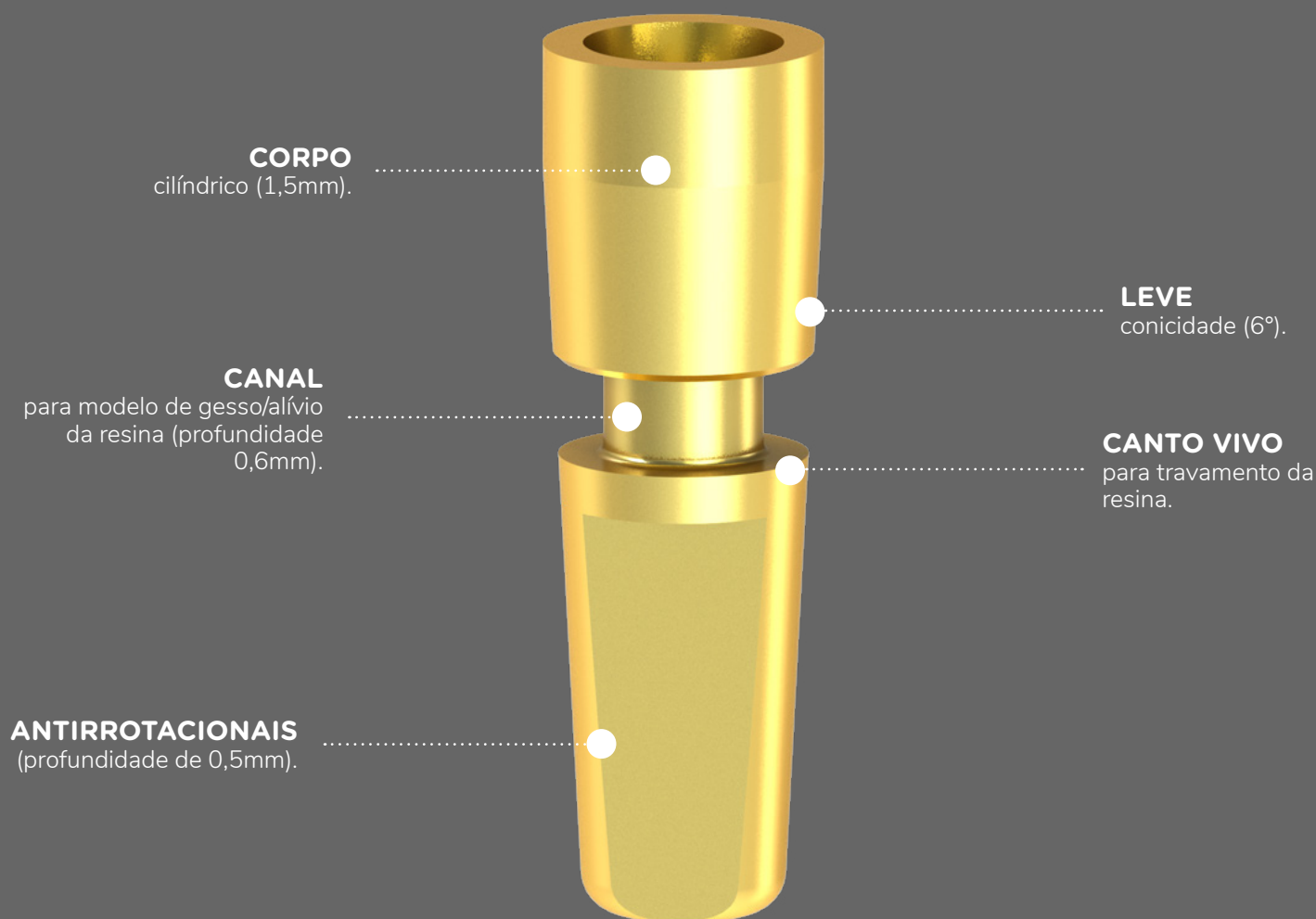

PLATAFORMA

DIMENSÃO CÓDIGO




**ANÁLOGO HÍBRIDO
IMPLANTE SL**

018-21-C26-00-00



**ANÁLOGO HÍBRIDO
IMPLANTE RE**

018-22-C26-00-00

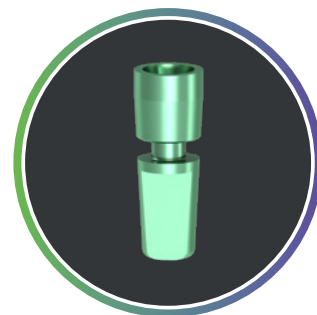

**ANÁLOGO HÍBRIDO
IMPLANTE SH**

018-23-C26-00-00



**ANÁLOGO HÍBRIDO
Ti-BASE**


Ø3,9 018-20-C26-20-39

Ø4,5 018-20-C26-20-45



**ANÁLOGO HÍBRIDO
MINI PILAR**

018-20-C26-20-00

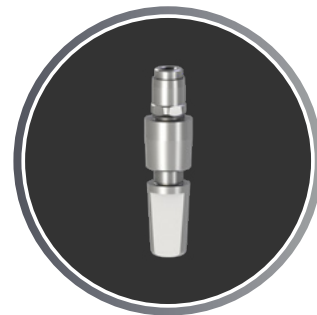

**ANÁLOGO HÍBRIDO
PILAR PLENUM**

Ø3,5 x 4mm 018-20-C26-50-33

Ø3,5 x 6mm 018-20-C26-51-33

Ø4,5 x 4mm 018-20-C26-50-45

Ø4,5 x 6mm 018-20-C26-51-45



**ANÁLOGO HÍBRIDO
PILAR EQUATOR**

018-20-C26-15-00



**CHAVE ANÁLOGO
HÍBRIDO**

018-15-F20-00-34


ANÁLOGO

O Análogo é indicado para uso laboratorial, reproduzindo precisamente a posição e a plataforma do implante no modelo de gesso. O componente é fabricado em titânio com superfície anodizada conforme a plataforma do implante.



BASE INFERIOR

levemente maior que o corpo para proporcionar melhor retenção do componente no modelo de gesso.


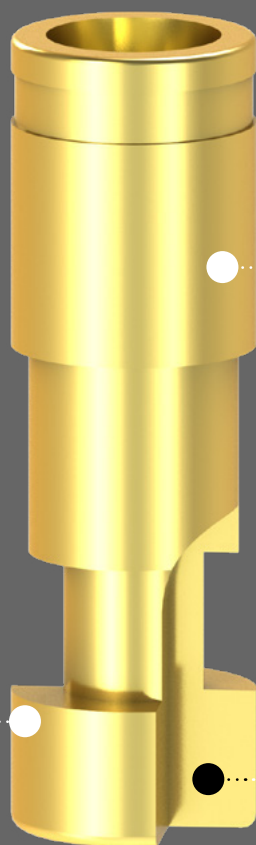


CORPO ESTREITO

para acomodação em regiões com limitação de espaço.


DUAS TRAVAS

antirrotacionais na base.

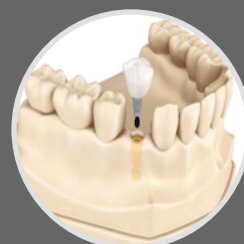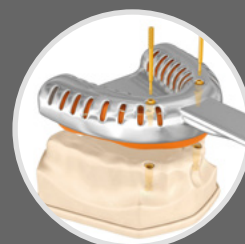


PLATAFORMA


DIMENSÃO CÓDIGO

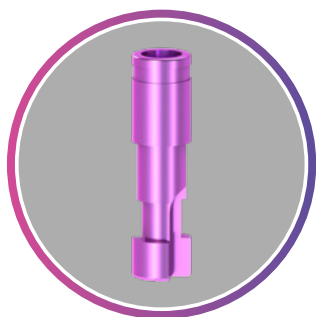

SLIM

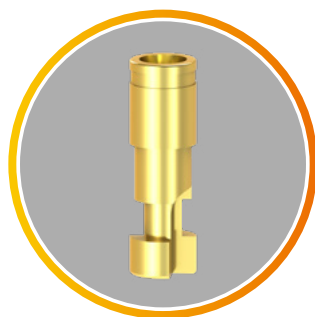

REGULAR

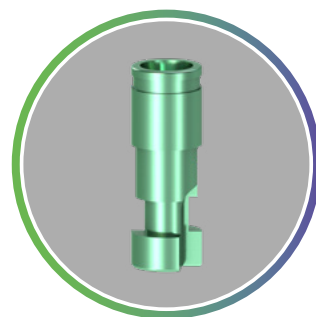

SHORT

11,5mm

018-21-C25-00-00



11,5mm

018-22-C25-00-00




11,5mm

018-23-C25-00-00

A 10x10 grid of dots on a white background. The dots are arranged in a regular pattern, with 10 dots per row and 10 dots per column, totaling 100 dots. The dots are small, black, and evenly spaced.

ANÁLOGO MINI PILAR

O Análogo Mini Pilar é indicado para uso laboratorial e reproduz precisamente a posição do item no modelo de gesso para confecção de próteses. O componente é fabricado em titânio com acabamento superficial polido.

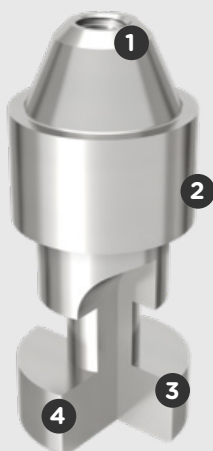

1. ROSCA DE 1,4mm.
2. CORPO ESTREITO PARA ACOMODAÇÃO EM REGIÕES DE DIFÍCIL ACESSO.
3. DUAS TRAVAS ANTIRROTACIONAIS NA BASE.
4. BASE INFERIOR MAIOR QUE O CORPO PARA PROPORCIONAR MELHOR RETENÇÃO.

DIMENSÃO CÓDIGO

11,5mm 018-20-C25-20-00



ANÁLOGO PILAR PLENUM®

O Análogo Pilar Plenum® é fabricado em titânio com acabamento superficial polido, o qual é indicado para uso laboratorial e reproduz precisamente a posição do componente no modelo de gesso.



1. CORPO ESTREITO PARA ACOMODAÇÃO EM REGIÕES DE DIFÍCIL ACESSO.
2. DUAS TRAVAS ANTIRROTACIONAIS NA BASE.
3. BASE INFERIOR MAIOR QUE O CORPO PARA PROPORCIONAR MELHOR RETENÇÃO.

DIMENSÃO CÓDIGO

Ø3,5 x 4,0mm	018-20-C25-50-33
Ø3,5 x 6,0mm	018-20-C25-51-33
Ø4,5 x 4,0mm	018-20-C25-50-45
Ø4,5 x 6,0mm	018-20-C25-51-45

A 4x20 grid of dots on a light gray background. The dots are arranged in four rows and twenty columns, forming a rectangular pattern. The first row has 20 dots, the second row has 20 dots, the third row has 20 dots, and the fourth row has 20 dots. The dots are evenly spaced both horizontally and vertically.

ANÁLOGO PILAR EQUATOR


O Análogo Mini Pilar é indicado para uso laboratorial e reproduz precisamente a posição do item no modelo de gesso para confecção de próteses. O componente é fabricado em titânio com acabamento superficial polido.



1. CORPO ESTREITO PARA ACOMODAÇÃO EM REGIÕES DE DIFÍCIL ACESSO.
2. DUAS TRAVAS ANTIRROTACIONAIS NA BASE.
3. BASE INFERIOR MAIOR QUE O CORPO PARA PROPORCIONAR MELHOR RETENÇÃO.

DIMENSÃO CÓDIGO

11,5mm 018-20-C25-15-00

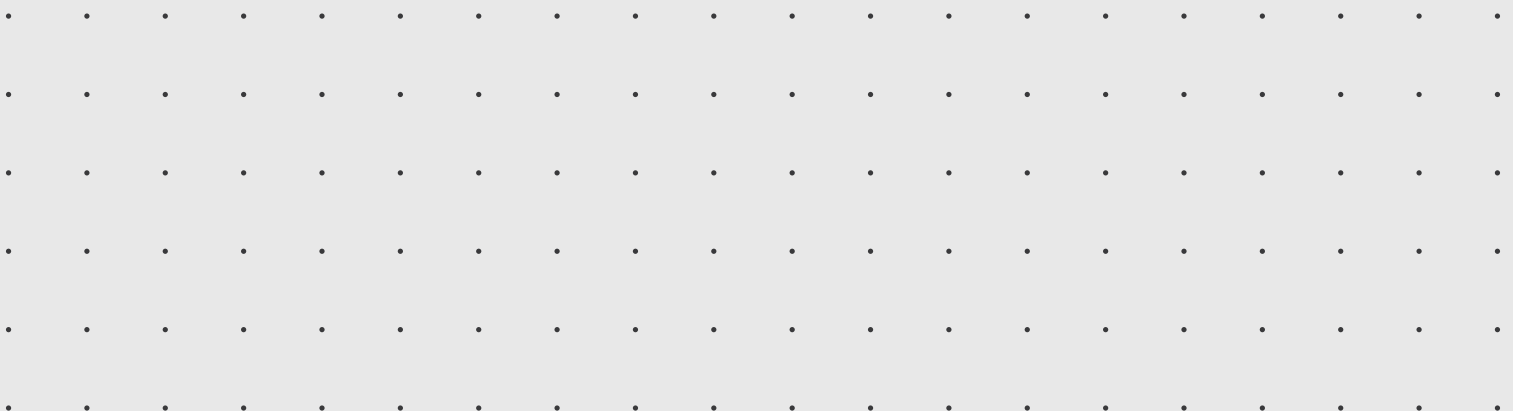

TRANSFERENTE MF/MA MINI PILAR


O Transferente MF/MA Mini Pilar é fabricado em titânio e possui clip para melhor precisão da moldagem. Pode ser utilizado em técnicas de moldagem aberta ou fechada.



1. PARAFUSO HEXÁGONO 1,2mm PARA MOLDEIRA ABERTA COM RANHURAS PARA FACILITAR A PRÉ-INSERÇÃO MANUAL DO PARAFUSO.
2. PARAFUSO PARA MOLDEIRA FECHADA, HEXÁGONO 1,2mm E REVESTIMENTO DLC PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E OXIDAÇÃO. TORQUE MÁXIMO RECOMENDADO DE 10Ncm.
3. CABEÇA COM CLIP E ENGATE RÁPIDO PARA PRECISÃO NO ENCAIXE.

DIMENSÃO CÓDIGO

Ø4,8mm 018-20-C32-20-00

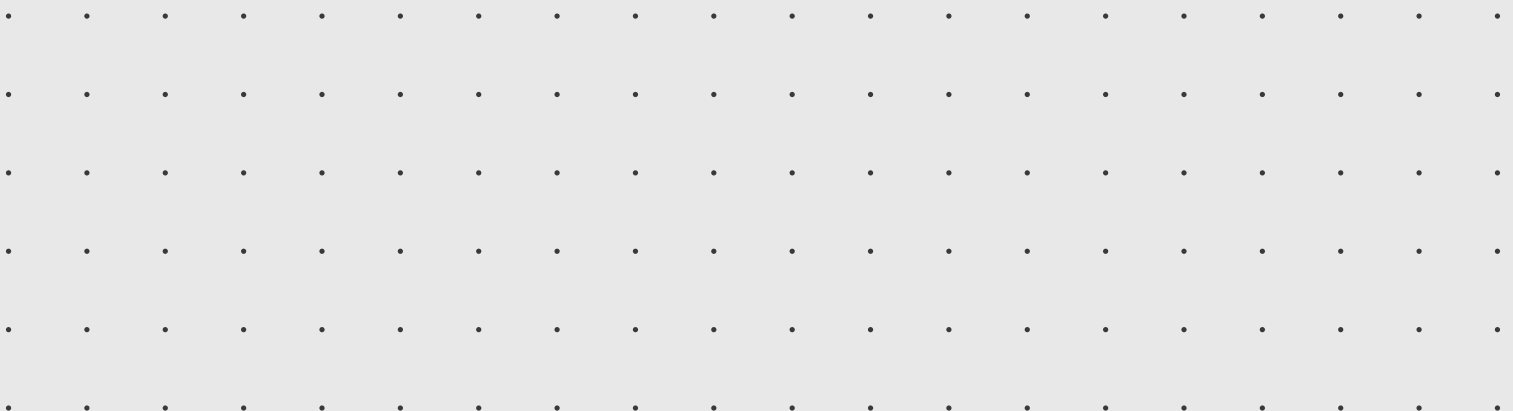

TRANSFERENTE MF/MA PILAR PLENUM®


O Transferente MF/MA Pilar Plenum® é fabricado em titânio e possui clip para melhor precisão de posicionamento do transferente na moldagem.



- 1. PARAFUSO HEXÁGONO 1,2mm PARA MOLDEIRA ABERTA COM RANHURAS PARA FACILITAR A PRÉ-INSERÇÃO MANUAL DO PARAFUSO.
- 2. CABEÇA COM CLIP E ENGATE RÁPIDO PARA PRECISÃO NO ENCAIXE.
- 3. PARAFUSO PARA MOLDEIRA FECHADA, HEXÁGONO 1,2mm E REVESTIMENTO DLC PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E OXIDAÇÃO. TORQUE MÁXIMO RECOMENDADO DE 10Ncm.

DIMENSÃO CÓDIGO

Ø3,5 x 4,0mm	018-20-C32-50-33
Ø3,5 x 6,0mm	018-20-C32-51-33
Ø4,5 x 4,0mm	018-20-C32-50-45
Ø4,5 x 6,0mm	018-20-C32-51-45

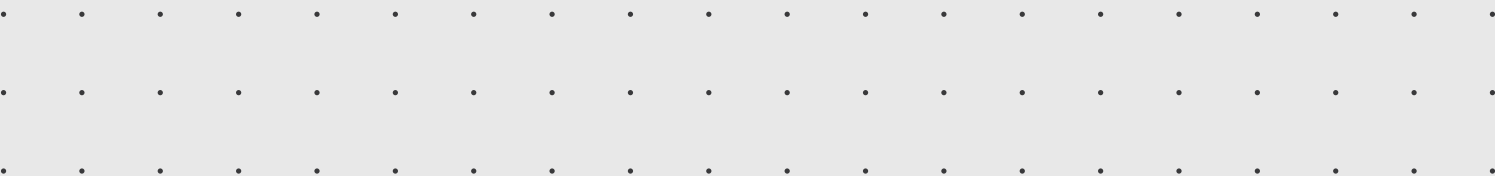

COPING MINI PILAR (CoCr)

O Coping Mini Pilar é utilizado para a elaboração do enceramento do núcleo e posterior sobrefundição e confecção da prótese, que poderá ser aparafusada ou cimentada sobre o Mini Pilar.



1. COMPLEMENTO COM CANAIS DE RETENÇÃO A CADA 1mm.
2. HEXÁGONO INTERNO DO PARAFUSO DE 1,2mm E REVESTIMENTO DLC PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E OXIDAÇÃO E FABRICADO EM TITÂNIO. TORQUE MÁXIMO RECOMENDADO DE 10Ncm.
3. BASE EM CoCr.

DIMENSÃO CÓDIGO

Ø4,8mm 018-20-C45-20-00

COPING MINI PILAR Ti

É um acessório indicado para a captura ou confecção de próteses múltiplas, provisórias, cimentadas ou parafusadas sobre os mini pilares.

1. CANAIS DE RETENÇÃO A CADA 1mm.
2. HEXÁGONO INTERNO DO PARAFUSO DE 1,2mm E REVESTIMENTO DLC PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E OXIDAÇÃO E FABRICADO EM TITÂNIO. TORQUE MÁXIMO RECOMENDADO DE 10Ncm.

DIMENSÃO CÓDIGO

Ø4,8mm 018-20-C36-20-00



COPING PILAR PLENUM® (CoCr)

O Coping Pilar Plenum® é utilizado para a elaboração do enceramento do núcleo e posterior sobrefundição e confecção da prótese, que poderá ser aparafusada ou cimentada sobre o pilar.



1. COMPLEMENTO COM CANAIS DE RETENÇÃO A CADA 1mm.
2. BASE EM CoCr, TRAVAS ANTIRROTACIONAIS E DUAS ALTURAS CIMENTÁVEIS.
3. HEXÁGONO INTERNO DO PARAFUSO DE 1,2mm E REVESTIMENTO DLC PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E OXIDAÇÃO E FABRICADO EM TITÂNIO. TORQUE MÁXIMO RECOMENDADO DE 10Ncm.

MODELOS

DIMENSÕES CÓDIGOS



CIMENTADO

DIÂMETRO x ALTURA

Ø3,5 x 4,0mm	018-20-C46-50-33
Ø4,5 x 4,0mm	018-20-C46-50-45
Ø3,5 x 6,0mm	018-20-C46-51-33
Ø4,5 x 6,0mm	018-20-C46-51-45



APARAFUSADO

DIÂMETRO x ALTURA

Ø3,5 x 4,0mm	018-20-C48-50-33
Ø4,5 x 4,0mm	018-20-C48-50-45
Ø3,5 x 6,0mm	018-20-C48-51-33
Ø4,5 x 6,0mm	018-20-C48-51-45

COPING PILAR PLENUM® Ti

É um acessório indicado para a captura ou confecção de próteses unitárias, provisórias, cimentadas ou parafusadas sobre o Pilar Plenum®.



1. CANAIS DE RETENÇÃO A CADA 1mm.
2. TRAVAS ANTIRROTACIONAIS E DUAS ALTURAS CIMENTÁVEIS.
3. HEXÁGONO INTERNO DO PARAFUSO DE 1,2mm E REVESTIMENTO DLC PARA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E OXIDAÇÃO E FABRICADO EM TITÂNIO. TORQUE MÁXIMO RECOMENDADO DE 10Ncm.

MODELO

DIMENSÕES CÓDIGOS



APARAFUSADO

DIÂMETRO x ALTURA

Ø3,5 x 4,0mm	018-20-C39-50-33
Ø4,5 x 4,0mm	018-20-C39-50-45
Ø3,5 x 6,0mm	018-20-C39-51-33
Ø4,5 x 6,0mm	018-20-C39-51-45

TAMPAS

Ti

São um acessório indicado para situações em que o componente precise ficar exposto na cavidade bucal durante o intervalo entre a instalação do componente e sua reabilitação protética. As tampas são confeccionadas em titânio e apresentam um formato anatômico que impede que restos alimentares se prendam às reentrâncias do componente, facilita a higienização e previne o acontecimento de lesões aos tecidos moles circundantes.

TAMPA MINI PILAR Ti



DIMENSÃO CÓDIGO

Ø4,8mm 018-20-C71-20-00

TAMPA PILAR PLENUM Ti



DIMENSÕES CÓDIGOS

Ø3,5 x 4,0mm	018-20-C71-50-33
Ø3,5 x 6,0mm	018-20-C71-51-33
Ø4,5 x 4,0mm	018-20-C71-50-45
Ø4,5 x 6,0mm	018-20-C71-51-45

PEEK

É um acessório indicado para proteger o componente em situações em que ele precise ficar exposto na cavidade bucal. Por serem confeccionadas em PEEK, as tampas apresentam biocompatibilidade com o tecido gengival e design que proporciona menor adesão de biofilme bacteriano. Além disso, seu formato anatômico impede que restos alimentares se prendam às reentrâncias do componente, facilitando a higienização e prevenindo lesões aos tecidos moles circundantes.

TAMPA MINI PILAR PEEK



DIMENSÃO CÓDIGO

Ø4,8mm 018-20-C70-20-00

TAMPA PILAR PLENUM PEEK



DIMENSÕES CÓDIGOS

Ø3,5 x 4,0mm	018-20-C70-50-33
Ø3,5 x 6,0mm	018-20-C70-51-33
Ø4,5 x 4,0mm	018-20-C70-50-45
Ø4,5 x 6,0mm	018-20-C70-51-45

COMPONENTE EQUATOR

O sistema Equator da Plenum é composto por três componentes que são responsáveis pela fixação e a retenção de uma prótese removível. Sendo eles:

Coifa: Atua como elemento de retenção entre a cápsula e o Pilar Equator.

Cápsula: Garante a adaptação entre as coifas e o Pilar Equator na retenção de próteses totais removíveis implanto-muco-suportadas.

Pilar Equator: Possui design anatômico que permite a acomodação adequada do tecido gengival. Esse é um conjunto simples e eficaz feito para expandir as possibilidades de tratamento aos pacientes da implantodontia.



CÁPSULA RETA

Acompanha coifa protética
+ Disco de Proteção

Ø4,5 x 2mm

018-20-C15-00-03




CÁPSULA ANGULAR

Acompanha coifa protética
+ Disco de Proteção

Ø4,5 x 2,2mm

018-20-C15-00-04

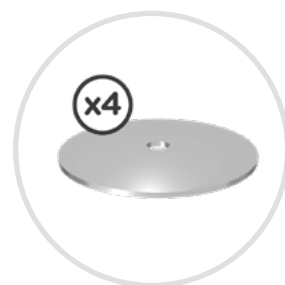

DISCO DE PROTEÇÃO

Vendido em pacotes
com 4 unidades

Ø14 x 1mm

018-20-C15-00-10



COIFA STANDARD

Vendida em pacotes
com 4 unidades

Ø3,8 x 1,7mm

018-20-C15-00-06



COIFA SUAVE

Vendida em pacotes
com 4 unidades

Ø3,8 x 1,7mm

018-20-C15-00-07



COIFA EXTRA SUAVE

Vendida em pacotes
com 4 unidades

Ø3,8 x 1,7mm

018-20-C15-00-08



COIFA RÍGIDA

Vendida em pacotes
com 4 unidades

Ø3,8 x 1,7mm

018-20-C15-00-05



COIFA PROTÉTICA

Vendida em pacotes
com 4 unidades

Ø3,8 x 1,7mm

018-20-C15-00-09

IMPLANTES DENTÁRIOS (OSSEOINTEGRÁVEL)

IMPLANTE DENTAL

REGISTRO ANVISA - 81684340014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-10-I10-30-08	IMPLANTE DENTAL SLIM Ø3,0X8MM
018-10-I10-30-10	IMPLANTE DENTAL SLIM Ø3,0X10MM
018-10-I10-30-11	IMPLANTE DENTAL SLIM Ø3,0X11,5MM
018-10-I10-30-13	IMPLANTE DENTAL SLIM Ø3,0X13MM
018-10-I10-30-15	IMPLANTE DENTAL SLIM Ø3,0X15MM
018-10-I10-35-08	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø3,5X8MM
018-10-I10-35-10	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø3,5X10MM
018-10-I10-35-11	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø3,5X11,5MM
018-10-I10-35-13	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø3,5X13MM
018-10-I10-35-15	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø3,5X15MM
018-10-I10-40-08	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø4,0X8MM
018-10-I10-40-10	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø4,0X10MM
018-10-I10-40-11	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø4,0X11,5MM
018-10-I10-40-13	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø4,0X13MM
018-10-I10-40-15	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø4,0X15MM
018-10-I10-45-08	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø4,5X8MM
018-10-I10-45-10	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø4,5X10MM
018-10-I10-45-11	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø4,5X11,5MM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-10-I10-45-13	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø4,5X13MM
018-10-I10-45-15	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø4,5X15MM
018-10-I10-50-08	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø5,0X8MM
018-10-I10-50-10	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø5,0X10MM
018-10-I10-50-11	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø5,0X11,5MM
018-10-I10-50-13	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø5,0X13MM
018-10-I10-60-08	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø6,0X8MM
018-10-I10-60-10	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø6,0X10MM
018-10-I10-60-13	IMPLANTE DENTAL REGULAR Ø6,0X13MM
018-10-I10-45-05	IMPLANTE DENTAL SHORT Ø4,5X5MM
018-10-I10-45-06	IMPLANTE DENTAL SHORT Ø4,5X6MM
018-10-I10-45-07	IMPLANTE DENTAL SHORT Ø4,5X7MM
018-10-I10-50-05	IMPLANTE DENTAL SHORT Ø5,0X5MM
018-10-I10-50-06	IMPLANTE DENTAL SHORT Ø5,0X6MM
018-10-I10-50-07	IMPLANTE DENTAL SHORT Ø5,0X7MM
018-10-I10-60-05	IMPLANTE DENTAL SHORT Ø6,0X5MM
018-10-I10-60-06	IMPLANTE DENTAL SHORT Ø6,0X6MM
018-10-I10-60-07	IMPLANTE DENTAL SHORT Ø6,0X7MM

COMPONENTES DE IMPLANTE ODONTOLÓGICO

COMPONENTE PEEK

REGISTRO ANVISA - 81684340009

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-21-C01-35-02	CICATRIZADOR SL Ø3,5 X 2MM
018-21-C01-35-03	CICATRIZADOR SL Ø3,5 X 3MM
018-21-C01-35-04	CICATRIZADOR SL Ø3,5 X 4MM
018-21-C01-35-05	CICATRIZADOR SL Ø3,5 X 5MM
018-21-C01-35-06	CICATRIZADOR SL Ø3,5 X 6MM
018-22-C01-35-02	CICATRIZADOR RE Ø3,5 X 2MM
018-22-C01-35-03	CICATRIZADOR RE Ø3,5 X 3MM
018-22-C01-35-04	CICATRIZADOR RE Ø3,5 X 4MM
018-22-C01-35-05	CICATRIZADOR RE Ø3,5 X 5MM
018-22-C01-35-06	CICATRIZADOR RE Ø3,5 X 6MM
018-22-C01-45-02	CICATRIZADOR RE Ø4,5 X 2MM
018-22-C01-45-03	CICATRIZADOR RE Ø4,5 X 3MM
018-22-C01-45-04	CICATRIZADOR RE Ø4,5 X 4MM
018-22-C01-45-05	CICATRIZADOR RE Ø4,5 X 5MM
018-22-C01-45-06	CICATRIZADOR RE Ø4,5 X 6MM
018-22-C01-55-02	CICATRIZADOR RE Ø5,5 X 2MM
018-22-C01-55-03	CICATRIZADOR RE Ø5,5 X 3MM
018-22-C01-55-04	CICATRIZADOR RE Ø5,5 X 4MM
018-22-C01-55-05	CICATRIZADOR RE Ø5,5 X 5MM
018-22-C01-55-06	CICATRIZADOR RE Ø5,5 X 6MM
018-23-C01-45-02	CICATRIZADOR SH Ø4,5 X 2MM
018-23-C01-45-03	CICATRIZADOR SH Ø4,5 X 3MM
018-23-C01-45-04	CICATRIZADOR SH Ø4,5 X 4MM
018-23-C01-45-05	CICATRIZADOR SH Ø4,5 X 5MM
018-23-C01-45-06	CICATRIZADOR SH Ø4,5 X 6MM
018-23-C01-55-02	CICATRIZADOR SH Ø5,5 X 2MM
018-23-C01-55-03	CICATRIZADOR SH Ø5,5 X 3MM
018-23-C01-55-04	CICATRIZADOR SH Ø5,5 X 4MM
018-23-C01-55-05	CICATRIZADOR SH Ø5,5 X 5MM
018-23-C01-55-06	CICATRIZADOR SH Ø5,5 X 6MM

COMPONENTES DE IMPLANTE ODONTOLÓGICO

COMPONENTE PEEK

REGISTRO ANVISA - 81684340009

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-20-C70-20-00	TAMPA MINI PILAR PEEK
018-20-C70-50-33	TAMPA PILAR PLENUM Ø3,5X4 PEEK
018-20-C70-51-33	TAMPA PILAR PLENUM Ø3,5X6 PEEK
018-20-C70-50-45	TAMPA PILAR PLENUM Ø4,5X4 PEEK
018-20-C70-51-45	TAMPA PILAR PLENUM Ø4,5X6 PEEK

COMPONENTES DE IMPLANTE ODONTOLÓGICO

PROVISÓRIO

REGISTRO ANVISA - 81684340012

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-21-C62-33-01	PROVISÓRIO SMART SL Ø3,5X1MM
018-21-C62-33-02	PROVISÓRIO SMART SL Ø3,5X2MM
018-21-C62-33-03	PROVISÓRIO SMART SL Ø3,5X3MM
018-21-C62-33-04	PROVISÓRIO SMART SL Ø3,5X4MM
018-21-C62-33-05	PROVISÓRIO SMART SL Ø3,5X5MM
018-21-C62-33-06	PROVISÓRIO SMART SL Ø3,5X6MM
018-22-C62-33-01	PROVISÓRIO SMART RE Ø3,6X1MM
018-22-C62-33-02	PROVISÓRIO SMART RE Ø3,6X2MM
018-22-C62-33-03	PROVISÓRIO SMART RE Ø3,6X3MM
018-22-C62-33-04	PROVISÓRIO SMART RE Ø3,6X4MM
018-22-C62-33-05	PROVISÓRIO SMART RE Ø3,6X5MM
018-22-C62-33-06	PROVISÓRIO SMART RE Ø3,6X6MM
018-22-C62-45-01	PROVISÓRIO SMART RE Ø4,5X1MM
018-22-C62-45-02	PROVISÓRIO SMART RE Ø4,5X2MM
018-22-C62-45-03	PROVISÓRIO SMART RE Ø4,5X3MM
018-22-C62-45-04	PROVISÓRIO SMART RE Ø4,5X4MM
018-22-C62-45-05	PROVISÓRIO SMART RE Ø4,5X5MM
018-22-C62-45-06	PROVISÓRIO SMART RE Ø4,5X6MM
018-23-C62-33-01	PROVISÓRIO SMART SH Ø4,5X1MM
018-23-C62-33-02	PROVISÓRIO SMART SH Ø4,5X2MM
018-23-C62-33-03	PROVISÓRIO SMART SH Ø4,5X3MM
018-23-C62-33-04	PROVISÓRIO SMART SH Ø4,5X4MM
018-23-C62-33-05	PROVISÓRIO SMART SH Ø4,5X5MM
018-23-C62-33-06	PROVISÓRIO SMART SH Ø4,5X6MM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-21-C60-33-01	PROVISÓRIO SL Ø3,5 X 1MM
018-21-C60-33-02	PROVISÓRIO SL Ø3,5 X 2MM
018-21-C60-33-03	PROVISÓRIO SL Ø3,5 X 3MM
018-21-C60-33-04	PROVISÓRIO SL Ø3,5 X 4MM
018-21-C60-33-05	PROVISÓRIO SL Ø3,5 X 5MM
018-21-C60-33-06	PROVISÓRIO SL Ø3,5 X 6MM
018-22-C60-33-01	PROVISÓRIO RE Ø3,6 X 1MM
018-22-C60-33-02	PROVISÓRIO RE Ø3,6 X 2MM
018-22-C60-33-03	PROVISÓRIO RE Ø3,6 X 3MM
018-22-C60-33-04	PROVISÓRIO RE Ø3,6 X 4MM
018-22-C60-33-05	PROVISÓRIO RE Ø3,6 X 5MM
018-22-C60-33-06	PROVISÓRIO RE Ø3,6 X 6MM
018-22-C60-45-01	PROVISÓRIO RE Ø4,5 X 1MM
018-22-C60-45-02	PROVISÓRIO RE Ø4,5 X 2MM
018-22-C60-45-03	PROVISÓRIO RE Ø4,5 X 3MM
018-22-C60-45-04	PROVISÓRIO RE Ø4,5 X 4MM
018-22-C60-45-05	PROVISÓRIO RE Ø4,5 X 5MM
018-22-C60-45-06	PROVISÓRIO RE Ø4,5 X 6MM
018-23-C60-33-01	PROVISÓRIO SH Ø4,5 X 1MM
018-23-C60-33-02	PROVISÓRIO SH Ø4,5 X 2MM
018-23-C60-33-03	PROVISÓRIO SH Ø4,5 X 3MM
018-23-C60-33-04	PROVISÓRIO SH Ø4,5 X 4MM

COMPONENTES DE IMPLANTE ODONTOLÓGICO

COMPONENTE PROTÉTICO

REGISTRO ANVISA - 81684340013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-21-C11-33-01	UCLA SMART SL Ø3,5 X 1MM
018-21-C11-33-02	UCLA SMART SL Ø3,5 X 2MM
018-21-C11-33-03	UCLA SMART SL Ø3,5 X 3MM
018-21-C11-33-04	UCLA SMART SL Ø3,5 X 4MM
018-21-C11-33-05	UCLA SMART SL Ø3,5 X 5MM
018-21-C11-33-06	UCLA SMART SL Ø3,5 X 6MM
018-22-C11-33-01	UCLA SMART RE Ø3,6 X 1MM
018-22-C11-33-02	UCLA SMART RE Ø3,6 X 2MM
018-22-C11-33-03	UCLA SMART RE Ø3,6 X 3MM
018-22-C11-33-04	UCLA SMART RE Ø3,6 X 4MM
018-22-C11-33-05	UCLA SMART RE Ø3,6 X 5MM
018-22-C11-33-06	UCLA SMART RE Ø3,6 X 6MM
018-22-C11-45-01	UCLA SMART RE Ø4,5X1MM
018-22-C11-45-02	UCLA SMART RE Ø4,5X2MM
018-22-C11-45-03	UCLA SMART RE Ø4,5X3MM
018-22-C11-45-04	UCLA SMART RE Ø4,5X4MM
018-22-C11-45-05	UCLA SMART RE Ø4,5X5MM
018-22-C11-45-06	UCLA SMART RE Ø4,5X6MM
018-23-C11-33-01	UCLA SMART SH Ø4,5 X 1MM
018-23-C11-33-02	UCLA SMART SH Ø4,5 X 2MM
018-23-C11-33-03	UCLA SMART SH Ø4,5 X 3MM
018-23-C11-33-04	UCLA SMART SH Ø4,5 X 4MM
018-23-C11-33-05	UCLA SMART SH Ø4,5 X 5MM
018-23-C11-33-06	UCLA SMART SH Ø4,5 X 6MM
018-21-C10-33-01	UCLA SL Ø3,5 X 1MM
018-21-C10-33-02	UCLA SL Ø3,5 X 2MM
018-21-C10-33-03	UCLA SL Ø3,5 X 3MM
018-21-C10-33-04	UCLA SL Ø3,5 X 4MM
018-21-C10-33-05	UCLA SL Ø3,5 X 5MM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-21-C10-33-06	UCLA SL Ø3,5 X 6MM
018-22-C10-33-01	UCLA RE Ø3,6 X 1MM
018-22-C10-33-02	UCLA RE Ø3,6 X 2MM
018-22-C10-33-03	UCLA RE Ø3,6 X 3MM
018-22-C10-33-04	UCLA RE Ø3,6 X 4MM
018-22-C10-33-05	UCLA RE Ø3,6 X 5MM
018-22-C10-33-06	UCLA RE Ø3,6 X 6MM
018-22-C10-45-01	UCLA RE Ø4,5X1MM
018-22-C10-45-02	UCLA RE Ø4,5X2MM
018-22-C10-45-03	UCLA RE Ø4,5X3MM
018-22-C10-45-04	UCLA RE Ø4,5X4MM
018-22-C10-45-05	UCLA RE Ø4,5X5MM
018-22-C10-45-06	UCLA RE Ø4,5X6MM
018-23-C10-33-01	UCLA SH Ø4,5 X 1MM
018-23-C10-33-02	UCLA SH Ø4,5 X 2MM
018-23-C10-33-03	UCLA SH Ø4,5 X 3MM
018-23-C10-33-04	UCLA SH Ø4,5 X 4MM
018-23-C10-33-05	UCLA SH Ø4,5 X 5MM
018-23-C10-33-06	UCLA SH Ø4,5 X 6MM
018-20-C45-20-00	COPING MINI PILAR
018-20-C46-50-33	COPING PILAR Ø3,5 H4 CAR
018-20-C46-51-33	COPING PILAR Ø3,5 H6 CAR
018-20-C48-50-33	COPING PILAR Ø3,5 H4 CAR PARAF
018-20-C48-51-33	COPING PILAR Ø3,5 H6 CAR PARAF
018-20-C46-50-45	COPING PILAR Ø4,5 H4 CAR
018-20-C46-51-45	COPING PILAR Ø4,5 H6 CAR

COMPONENTES DE IMPLANTE ODONTOLÓGICO

COMPONENTE

REGISTRO ANVISA - 81684340011

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-22-C20-48-01	MINI PILAR RE Ø4,8 X 1MM
018-22-C20-48-02	MINI PILAR RE Ø4,8 X 2MM
018-22-C20-48-03	MINI PILAR RE Ø4,8 X 3MM
018-22-C20-48-04	MINI PILAR RE Ø4,8 X 4MM
018-22-C20-48-05	MINI PILAR RE Ø4,8 X 5MM
018-22-C20-48-06	MINI PILAR RE Ø4,8 X 6MM
018-23-C20-48-01	MINI PILAR SH Ø4,8 X 1MM
018-23-C20-48-02	MINI PILAR SH Ø4,8 X 2MM
018-23-C20-48-03	MINI PILAR SH Ø4,8 X 3MM
018-23-C20-48-04	MINI PILAR SH Ø4,8 X 4MM
018-23-C20-48-05	MINI PILAR SH Ø4,8 X 5MM
018-23-C20-48-06	MINI PILAR SH Ø4,8 X 6MM
018-22-C21-48-02	MINI PILAR 17° RE Ø4,8 X 2MM
018-22-C21-48-03	MINI PILAR 17° RE Ø4,8 X 3MM
018-22-C21-48-04	MINI PILAR 17° RE Ø4,8 X 4MM
018-22-C21-48-05	MINI PILAR 17° RE Ø4,8 X 5MM
018-23-C21-48-02	MINI PILAR 17° SH Ø4,8 X 2MM
018-23-C21-48-03	MINI PILAR 17° SH Ø4,8 X 3MM
018-23-C21-48-04	MINI PILAR 17° SH Ø4,8 X 4MM
018-23-C21-48-05	MINI PILAR 17° SH Ø4,8 X 5MM
018-21-C50-33-01	PILAR PLENUM 4MM SL Ø3,5 X 1MM
018-21-C50-33-02	PILAR PLENUM 4MM SL Ø3,5 X 2MM
018-21-C50-33-03	PILAR PLENUM 4MM SL Ø3,5 X 3MM
018-21-C50-33-04	PILAR PLENUM 4MM SL Ø3,5 X 4MM
018-21-C50-33-05	PILAR PLENUM 4MM SL Ø3,5 X 5MM
018-21-C50-33-06	PILAR PLENUM 4MM SL Ø3,5 X 6MM
018-21-C51-33-01	PILAR PLENUM 6MM SL Ø3,5 X 1MM
018-21-C51-33-02	PILAR PLENUM 6MM SL Ø3,5 X 2MM
018-21-C51-33-03	PILAR PLENUM 6MM SL Ø3,5X 3MM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-21-C51-33-05	PILAR PLENUM 6MM SL Ø3,5 X 5MM
018-21-C51-33-06	PILAR PLENUM 6MM SL Ø3,5 X 6MM
018-22-C50-33-01	PILAR PLENUM 4MM RE Ø3,5X 1MM
018-22-C50-33-02	PILAR PLENUM 4MM RE Ø3,5 X 2MM
018-22-C50-33-03	PILAR PLENUM 4MM RE Ø3,5 X 3MM
018-22-C50-33-04	PILAR PLENUM 4MM RE Ø3,5 X 4MM
018-22-C50-33-05	PILAR PLENUM 4MM RE Ø3,5 X 5MM
018-22-C50-33-06	PILAR PLENUM 4MM RE Ø3,5 X 6MM
018-22-C51-33-01	PILAR PLENUM 6MM RE Ø3,5 X 1MM
018-22-C51-33-02	PILAR PLENUM 6MM RE Ø3,5 X 2MM
018-22-C51-33-03	PILAR PLENUM 6MM RE Ø3,5 X 3MM
018-22-C51-33-04	PILAR PLENUM 6MM RE Ø3,5 X 4MM
018-22-C51-33-05	PILAR PLENUM 6MM RE Ø3,5 X 5MM
018-22-C51-33-06	PILAR PLENUM 6MM RE Ø3,5 X 6MM
018-22-C50-45-01	PILAR PLENUM 4MM RE Ø4,5 X 1MM
018-22-C50-45-02	PILAR PLENUM 4MM RE Ø4,5 X 2MM
018-22-C50-45-03	PILAR PLENUM 4MM RE Ø4,5 X 3MM
018-22-C50-45-04	PILAR PLENUM 4MM RE Ø4,5 X 4MM
018-22-C50-45-05	PILAR PLENUM 4MM RE Ø4,5 X 5MM
018-22-C50-45-06	PILAR PLENUM 4MM RE Ø4,5 X 6MM
018-22-C51-45-01	PILAR PLENUM 6MM RE Ø4,5 X 1MM
018-22-C51-45-02	PILAR PLENUM 6MM RE Ø4,5 X 2MM
018-22-C51-45-03	PILAR PLENUM 6MM RE Ø4,5 X 3MM
018-22-C51-45-04	PILAR PLENUM 6MM RE Ø4,5 X 4MM
018-22-C51-45-05	PILAR PLENUM 6MM RE Ø4,5 X 5MM
018-22-C51-45-06	PILAR PLENUM 6MM RE Ø4,5 X 6MM
018-23-C50-45-01	PILAR PLENUM 4MM SH Ø4,5 X 1MM
018-23-C50-45-02	PILAR PLENUM 4MM SH Ø4,5 X 2MM
018-23-C50-45-03	PILAR PLENUM 4MM SH Ø4,5 X 3MM

COMPONENTES DE IMPLANTE ODONTOLÓGICO

COMPONENTE

REGISTRO ANVISA - 81684340011

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-23-C50-45-05	PILAR PLENUM 4MM SH Ø4,5 X 5MM
018-23-C50-45-06	PILAR PLENUM 4MM SH Ø4,5 X 6MM
018-23-C51-45-01	PILAR PLENUM 6MM SH Ø4,5 X 1MM
018-23-C51-45-02	PILAR PLENUM 6MM SH Ø4,5 X 2MM
018-23-C51-45-03	PILAR PLENUM 6MM SH Ø4,5 X 3MM
018-23-C51-45-04	PILAR PLENUM 6MM SH Ø4,5 X 4MM
018-23-C51-45-05	PILAR PLENUM 6MM SH Ø4,5 X 5MM
018-22-C15-45-01	PILAR EQUATOR RE Ø4,5 X 1MM
018-22-C15-45-02	PILAR EQUATOR RE Ø4,5 X 2MM
018-22-C15-45-03	PILAR EQUATOR RE Ø4,5 X 3MM
018-22-C15-45-04	PILAR EQUATOR RE Ø4,5 X 4MM
018-22-C15-45-05	PILAR EQUATOR RE Ø4,5 X 5MM
018-22-C15-45-06	PILAR EQUATOR RE Ø4,5 X 6MM
018-23-C15-45-01	PILAR EQUATOR SH Ø4,5 X 1MM
018-23-C15-45-02	PILAR EQUATOR SH Ø4,5 X 2MM
018-23-C15-45-03	PILAR EQUATOR SH Ø4,5 X 3MM
018-23-C15-45-04	PILAR EQUATOR SH Ø4,5 X 4MM
018-23-C15-45-05	PILAR EQUATOR SH Ø4,5 X 5MM
018-23-C15-45-06	PILAR EQUATOR SH Ø4,5 X 6MM
018-20-C36-20-00	COPING MINI PILAR TI
018-20-C39-50-33	COPING PILAR PLENUM Ø3,5 H4 TI
018-20-C39-50-45	COPING PILAR PLENUM Ø4,5 H4 TI
018-20-C39-51-33	COPING PILAR PLENUM Ø3,5 H6 TI
018-20-C39-51-45	COPING PILAR PLENUM Ø4,5 H6 TI
018-20-C71-20-00	TAMPA MINI PILAR TI
018-20-C71-50-33	TAMPA PILAR PLENUM Ø3,5X4 TI
018-20-C71-50-45	TAMPA PILAR PLENUM Ø4,5X4 TI
018-20-C71-51-33	TAMPA PILAR PLENUM Ø3,5X6 TI

COMPONENTES DE IMPLANTE ODONTOLÓGICO

COMPONENTE EQUATOR

REGISTRO ANVISA - 81684349003

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-20-C15-00-03	CÁPSULA RETA
018-20-C15-00-04	CÁPSULA ANGULAR
018-20-C15-00-05	COIFA RÍGIDA
018-20-C15-00-06	COIFA STANDARD
018-20-C15-00-07	COIFA SUAVE
018-20-C15-00-08	COIFA EXTRA SUAVE
018-20-C15-00-09	COIFA PROTÉTICA
018-20-C15-00-10	DISCO DE PROTEÇÃO

COMPONENTES DE IMPLANTE ODONTOLÓGICO

COMPONENTE

REGISTRO ANVISA - 81684340011

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-21-C05-33-01	TI-BASE SL Ø3,9 X 1MM
018-21-C05-33-02	TI-BASE SL Ø3,9 X 2MM
018-21-C05-33-03	TI-BASE SL Ø3,9 X 3MM
018-21-C05-33-04	TI-BASE SL Ø3,9 X 4MM
018-21-C05-33-05	TI-BASE SL Ø3,9 X 5MM
018-21-C05-33-06	TI-BASE SL Ø3,9 X 6MM
018-22-C05-33-01	TI-BASE RE Ø3,9 X 1MM
018-22-C05-33-02	TI-BASE RE Ø3,9 X 2MM
018-22-C05-33-03	TI-BASE RE Ø3,9 X 3MM
018-22-C05-33-04	TI-BASE RE Ø3,9 X 4MM
018-22-C05-33-05	TI-BASE RE Ø3,9 X 5MM
018-22-C05-33-06	TI-BASE RE Ø3,9 X 6MM
018-22-C05-45-01	TI-BASE RE Ø4,5 X 1MM
018-22-C05-45-02	TI-BASE RE Ø4,5 X 2MM
018-22-C05-45-03	TI-BASE RE Ø4,5 X 3MM
018-22-C05-45-04	TI-BASE RE Ø4,5 X 4MM
018-22-C05-45-05	TI-BASE RE Ø4,5 X 5MM
018-22-C05-45-06	TI-BASE RE Ø4,5 X 6MM
018-23-C05-45-01	TI-BASE SH Ø4,5 X 1MM
018-23-C05-45-02	TI-BASE SH Ø4,5 X 2MM
018-23-C05-45-03	TI-BASE SH Ø4,5 X 3MM
018-23-C05-45-04	TI-BASE SH Ø4,5 X 4MM
018-23-C05-45-05	TI-BASE SH Ø4,5 X 5MM
018-23-C05-45-06	TI-BASE SH Ø4,5 X 6MM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-21-C07-33-01	TI-BASE SMART SL Ø3,9X1MM
018-21-C07-33-02	TI-BASE SMART SL Ø3,9X2MM
018-21-C07-33-03	TI-BASE SMART SL Ø3,9X3MM
018-21-C07-33-04	TI-BASE SMART SL Ø3,9X4MM
018-21-C07-33-05	TI-BASE SMART SL Ø3,9X5MM
018-21-C07-33-06	TI-BASE SMART SL Ø3,9X6MM
018-22-C07-33-01	TI-BASE SMART RE Ø3,9X1MM
018-22-C07-33-02	TI-BASE SMART RE Ø3,9X2MM
018-22-C07-33-03	TI-BASE SMART RE Ø3,9X3MM
018-22-C07-33-04	TI-BASE SMART RE Ø3,9X4MM
018-22-C07-33-05	TI-BASE SMART RE Ø3,9X5MM
018-22-C07-33-06	TI-BASE SMART RE Ø3,9X6MM
018-22-C07-45-01	TI-BASE SMART RE Ø4,5X1MM
018-22-C07-45-02	TI-BASE SMART RE Ø4,5X2MM
018-22-C07-45-03	TI-BASE SMART RE Ø4,5X3MM
018-22-C07-45-04	TI-BASE SMART RE Ø4,5X4MM
018-22-C07-45-05	TI-BASE SMART RE Ø4,5X5MM
018-22-C07-45-06	TI-BASE SMART RE Ø4,5X6MM
018-23-C07-45-01	TI-BASE SMART SH Ø4,5X1MM
018-23-C07-45-02	TI-BASE SMART SH Ø4,5X2MM
018-23-C07-45-03	TI-BASE SMART SH Ø4,5X3MM
018-23-C07-45-04	TI-BASE SMART SH Ø4,5X4MM
018-23-C07-45-05	TI-BASE SMART SH Ø4,5X5MM
018-23-C07-45-06	TI-BASE SMART SH Ø4,5X6MM

COMPONENTES PARA IMPLANTE ODONTOLÓGICO

COMPONENTE DIGITAL

REGISTRO ANVISA - 81684340006

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-21-C06-20-00	SCANBODY IMPLANTE SL
018-22-C06-20-00	SCANBODY IMPLANTE RE
018-23-C06-20-00	SCANBODY IMPLANTE SH
018-20-C06-05-33	SCANBODY TI-BASE Ø3,9
018-20-C06-05-45	SCANBODY TI-BASE Ø4,5
018-20-C06-20-00	SCANBODY MINI PILAR
018-20-C06-50-33	SCANBODY PILAR PLENUM Ø3,5X4MM
018-20-C06-51-33	SCANBODY PILAR PLENUM Ø3,5X6MM
018-20-C06-50-45	SCANBODY PILAR PLENUM Ø4,5X4MM
018-20-C06-51-45	SCANBODY PILAR PLENUM Ø4,5X6MM

COMPONENTE LABORATORIAL

NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO ANVISA USO LABORATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-21-C26-00-00	ANALOGO HIBRIDO IMPLANTE PLENUM SL
018-22-C26-00-00	ANALOGO HIBRIDO IMPLANTE PLENUM RE
018-23-C26-00-00	ANALOGO HIBRIDO IMPLANTE PLENUM SH
018-20-C26-20-00	ANALOGO HIBRIDO MINI PILAR
018-20-C26-50-33	ANALOGO HIBRIDO PILAR PLENUM Ø3,5x4mm
018-20-C26-51-33	ANALOGO HIBRIDO PILAR PLENUM Ø3,5x6mm
018-20-C26-50-45	ANALOGO HIBRIDO PILAR PLENUM Ø4,5x4mm
018-20-C26-51-45	ANALOGO HIBRIDO PILAR PLENUM Ø4,5x6mm
018-20-C26-20-39	ANALOGO HIBRIDO TI-BASE Ø3,9
018-20-C26-20-45	ANALOGO HIBRIDO TI-BASE Ø4,5
018-20-C26-15-00	ANALOGO HIBRIDO PILAR EQUATOR
018-15-F20-00-34	CHAVE ANÁLOGO HÍBRIDO

COMPONENTES DE IMPLANTE ODONTOLÓGICO

COMPONENTE LABORATORIAL

NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO ANVISA USO LABORATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-21-C25-00-00	ANALOGO IMPLANTE SL
018-22-C25-00-00	ANALOGO IMPLANTE RE
018-23-C25-00-00	ANALOGO IMPLANTE SH
018-20-C25-20-00	ANALOGO MINI PILAR
018-20-C25-50-33	ANALOGO PILAR PLENUM Ø3,5 X 4MM
018-20-C25-51-33	ANALOGO PILAR PLENUM Ø3,5 X 6MM
018-20-C25-50-45	ANALOGO PILAR PLENUM Ø4,5 X 4MM

TRANSFERENTE

REGISTRO ANVISA - 81684340010

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-21-C32-00-00	TRANSFERENTE MF/MA IMPLANTE SL
018-22-C32-00-00	TRANSFERENTE MF/MA IMPLANTE RE
018-23-C32-00-00	TRANSFERENTE MF/MA IMPLANTE SH
018-20-C32-20-00	TRANSFERENTE MF/MA MINI PILAR
018-20-C32-50-33	TRANSFERENTE MF/MA PILAR Ø3,5X4MM
018-20-C32-51-33	TRANSFERENTE MF/MA PILAR Ø3,5X6MM

Suporte Plenum[®]

Oferecemos suporte técnico especializado em todo o território nacional, por meio de uma equipe profissional, qualificada e apta para esclarecer todas as suas possíveis dúvidas.

ENTRE EM CONTATO





INOVAÇÃO PARA UMA VIDA PLENA

AV. AIN ATA, 640 – JUNDIAÍ – SP – CEP – 13212-213

  +55 11 3109 9000

 relacionamento@plenum.bio

www.plenum.bio

Catálogo Digital Implante Dental & Componentes – Rev. 04